


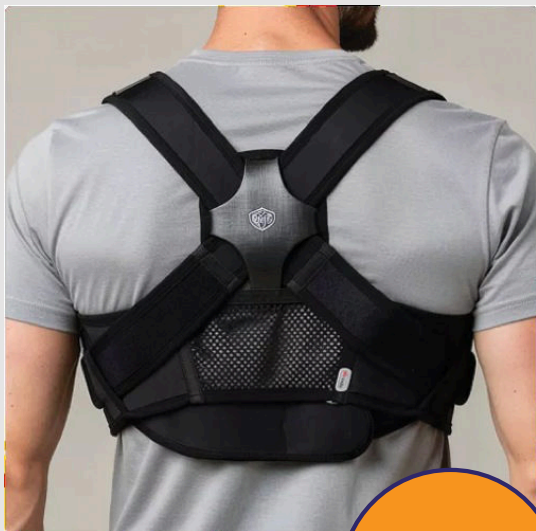

**X-Back
houdings-
correctiesysteem**

DorsoFit™

**Houdingscorrigerende brace
voor de bovenrug**

DorsoFit™

Houdingscorrigerende brace voor de bovenrug



Productomschrijving:

Product-SKU:
01180501011

Productcategorie:

Neopreen wikkelframe voor de romp met X-vormige verstelbare schouderbanden.

Lichaamsdeel:

Romp

Productoverzicht:

De DorsoFit is een steunbrace voor de bovenrug, speciaal ontwikkeld voor houdingscorrectie, stabiliteit en ondersteuning. De belangrijkste eigenschappen zijn:

Doel: Helpt de schouders naar achteren te houden, wat de belasting van de nek, de bovenrug en de schouderpijlen kan verminderen.

Ontwerp: Twee schouderbanden vormen een X op de bovenrug. Zij helpen de schouders naar achteren te brengen en gaan een gebogen houding tegen, zonder de functionele beweging te beperken.

Comfort: Zacht neopreen met verstelbare X-vormige banden, ideaal voor dagelijks dragen.

Algemeen: Ondersteunt een rechte houding van de bovenrug en geeft tegelijk steun aan de rug.

DorsoFit™

Houdingscorrigerende brace voor de bovenrug

Onderdelen van de brace:



A. Schouderbanden:

Geven maximale, instelbare houdingscorrectie.

B. Centraal stabilisatiepaneel voor de bovenrug:

Helpt de schouders naar achteren te houden.

C. Ademende air mesh zone op de rug:

Zorgt voor koeling en ademend vermogen.

D. Verstelbare sluitbanden op de borst:


Zorgen voor een pasvorm op maat, passend bij elke lichaamsomvang.

DorsoFit™

Houdingscorrigerende brace voor de bovenrug

Eigenschappen en voordelen:

- Ergonomisch ontwerp.
- X-vormig systeem dat de schouders naar achteren brengt, voor een betere uitlijning.
- Verstelbare dubbele banden voor spanning op maat.
- Ademend, lichtgewicht materiaal, geschikt voor langdurig dragen.
- Niet-beperkend ontwerp dat gewone dagelijkse bezigheden toelaat.
- Helpt houdingsvermoeidheid te verminderen en het uithoudingsvermogen van de bovenrug te verbeteren.
- Slank profiel, discreet onder kleding, al wordt de brace meestal over de kleding gedragen.

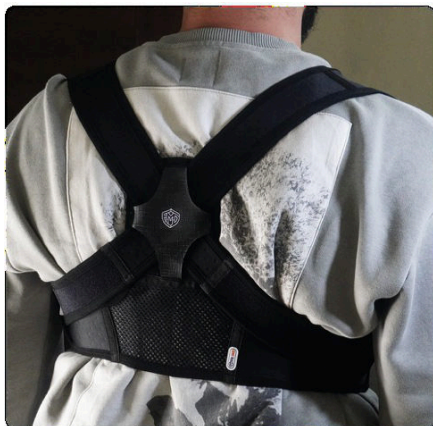

Houdingscorrigerende brace voor de bovenrug

Indicaties:

De DorsoFit houdingsbrace is bedoeld om niet-rigide ondersteuning te geven aan de bovenrug en de schouders, ter ondersteuning van houdingscorrectie. De brace is bedoeld voor:

- Houdingskyfose of een houding met naar voren afhangende schouders waarbij externe correctie nodig is.
- Vermoeidheid van de houdingspijnen of lichte overbelasting van de bovenrug door lang zitten, computergebruik of bureauwerk.
- Lichte houdingsafwijkingen van de borstwervelkolom waarbij flexibele ondersteuning klinisch passend is.
- Naar voren gekantelde schouders door spieronbalans, bijvoorbeeld strakke borstspieren en zwakke schouderbladstabilisatoren.
- Houdingstraining en proprioceptieve terugkoppeling onder begeleiding van een bevoegde zorgverlener.
- Algemene houdingsbewustwording bij jongeren en volwassenen zonder structurele afwijking van de wervelkolom.



DorsoFit™


Houdingscorrigerende brace voor de bovenrug

Maatinformatie:

Beschikbaar in:

- Small/Medium (S/M)
- Large/Extra Large (L/XL)

Borstomtrek onder de borst	S/M	L/XL
Inches	28-36	36-42
Centimeters	71-91.5	91.5-106.5

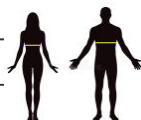

Materiaal en samenstelling:

- Neopreen
- Air mesh
- Klittenbanden

Was- en onderhoudsinstructies:



Alleen
handwas



Wassen met koud
zeepsop



Alleen in schaduw
aan lucht drogen



Niet
strijken



Niet
bleken



Volledig laten drogen
voor gebruik

DorsoFit™

Houdingscorrigerende brace voor de bovenrug

Waarschuwingen / contra-indicaties:

Gebruik de ondersteunende brace niet bij:

- Rigide afwijkingen van de wervelkolom waarvoor een gestructureerde orthese nodig is.
- Breuken, acuut trauma of stabilisatie na een operatie, tenzij een zorgverlener anders adviseert.
- Beschadigde huid, dermatitis of een bekende allergie voor neopreen of nylon.

Aanvullende voorzorgsmaatregelen:

- Gebruik met tussenpozen; draag niet langer dan 8 uur aaneengesloten.
- Niet dragen tijdens het slapen.
- Stop het gebruik bij een allergische reactie, zoals blaren, branderig gevoel of jeuk, en raadpleeg een arts.

Raadpleeg voor gebruik altijd uw arts of fysiotherapeut en volg hun specifieke advies.

VitaBrace

Productinformatie & ondersteuning

www.vitabrace.nl



DorsoFit™

Houdingscorrigerende brace voor de bovenrug

Verkocht en ondersteund door

VitaBrace

www.vitabrace.nl



DorsoFit™

Productinformatie & ondersteuning

VitaBrace


www.vitabrace.nl

VitaBrace is verkooppunt en aanspreekpunt voor productinformatie
en ondersteuning.



DorsoFit™

Houdingscorrigerende brace voor de bovenrug

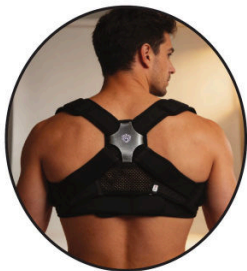

Opslag:

Houd uw brace in een hygiënische staat. Was hem indien nodig. Bewaar de brace wanneer u hem niet gebruikt in het meegeleverde ziplockzakje op een schone, droge en hygiënische plek.

DorsoFit™

Houdingscorrigerende brace voor de bovenrug

Draaginstructies:



Stap 1: Houd de brace zo vast dat de air mesh zone midden op uw bovenrug ligt. Steek beide armen door de schouderbanden, zoals bij het omdoen van een rugzak.



Stap 2: Trek beide banden naar voren om de borst.

DorsoFit™

Houdingscorrigerende brace voor de bovenrug

Draaginstructies:



Stap 3: Leg de bovenste band over de binnenste band en zet hem vast met het klittenband.



Stap 4: Stel de spanning van de schouderbanden af tot een comfortabele schouderstand zonder bewegingsbeperking. Controleer en stel na een paar minuten opnieuw bij voor optimaal comfort.

Tip: Voor een optimaal effect moet de brace strak genoeg zitten om de houding te corrigeren, zonder de bloedsomloop af te knellen.

DorsoFit™

Houdingscorrigerende brace voor de bovenrug

VitaBrace

Volledige productinformatie

www.vitabrace.nl

Disclaimer:

Deze informatie is uitsluitend bedoeld als algemene product- en gebruiksinformatie. De DorsoFit is een medisch hulpmiddel van klasse I. Het product is bedoeld ter ondersteuning bij het omgaan met klachten en vervangt geen professionele medische diagnose of behandeling. Raadpleeg bij vragen over een medische aandoening altijd uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener.

www.vitabrace.nl