



**Gerichte
elleboog-
compressie**

ElbowFit-Press™
Elleboogcompressiebrace

ElbowFit-Press™

Elleboogcompressiebrace



Productomschrijving:

Product-SKU:
01030102011

Productcategorie:

Gebreide elastische compressiebrace, rondom sluitend.

Lichaamsdeel:

Elleboog

Productoverzicht:

De ElbowFit-Press is een lichtgewicht, vierwegs rekbare elleboogbrace die zachte dynamische compressie, warmte en stabiliteit geeft aan het ellebooggewricht.

Doel: Geeft stabiliteit, warmte en zachte compressie.

Ontwerp: Een lichtgewicht, vierwegs rekbare sleeve met een dynamische compressiepasvorm.

Comfort: Houdt warmte vast en vergemakkelijkt de dagelijkse beweging door een flexibel, ademend en ondersteunend gevoel.

Algemeen: Een veelzijdige, slanke elleboogbrace, ontwikkeld voor pijnverlichting en ondersteuning van het gewricht tijdens sport of in het dagelijks leven.

ElbowFit-Press™

Elleboogcompressiebrace

Onderdelen van de brace:



A. Elastisch gebreid compressieweefsel:

Geeft gelijkmatige therapeutische vierwegs compressie ter ondersteuning van de spieren en om overbelasting te verminderen.

B. Anatomisch vormgegeven gewrichtszone:

Sluit natuurlijk aan rond de elleboog voor een optimale pasvorm en drukverdeling.

C. Zachte antislipzoom:

Voorkomt dat de brace afzakt of gaat rimpelen.

D. Ademend, vochtafvoerend materiaal:

Bevordert de luchtdoorstroming en houdt de huid droog bij langdurig dragen.

ElbowFit-Press™

Elleboogcompressiebrace

Eigenschappen en voordelen:

- Ergonomisch gecontoureerd ontwerp.
- Vierwegs gebreid compressieweefsel voor een dynamische en nauwkeurigere pasvorm dan tweewegs sleeves.
- Gerichte compressie rond de gewrichtslijn.
- Ademend, vochtafvoerend breisel.
- Lichtgewicht en rekbaar voor comfort.
- Houdt warmte vast rond het gewricht.
- Uniseks en geschikt voor beide armen.
- Discreet te dragen onder kleding.
- Geschikt voor langdurig dragen tot maximaal 8 uur.



ElbowFit-Press™

Elleboogcompressiebrace

Indicaties:

Meest voorkomende toepassingen:

- Lichte tot matige elleboogpijn.
- Algemene zwakte of vermoeidheid van het ellebooggewricht.
- Klachten door herhaalde belasting of overbelasting.

Specifieke toepassingen:

1. Acuut letsel:

- Lichte verstuikingen of verrekkingen van de elleboog (graad I tot II).
- Beheersing van zwelling na een trauma.
- Lichte kneuzingen of ontsteking van de weke delen.

2. Chronische aandoeningen en degeneratieve klachten:

- Tendinitis of laterale epicondylitis, oftewel tenniselleboog.
- Mediale epicondylitis, oftewel golferselleboog.
- Vroege artrose van het ellebooggewricht.

3. Revalidatie na een operatie of letsel:

- Na een artroscopie van de elleboog.
- Fase na botgenezing of na het verwijderen van gips.
- Gecontroleerde ondersteuning tijdens fysiotherapie.

4. Sport en activiteit:

- Preventieve ondersteuning bij racketsporten, krachttraining, typen of tillen.
- Onderhoudsbrace voor sporters bij herhaalde belasting van de elleboog.

5. Zwelling en pijn na inspanning:

- Zwelling of een gespannen gevoel na inspanning.

ElbowFit-Press™

Elleboogcompressiebrace

Maatinformatie:

Beschikbaar in:

- Small/Medium (S/M)
- Large/Extra Large (L/XL)



Armomtrek 4 tot 5 inch boven de elleboogpunt bij gestrekte arm	S/M	L/XL
Inches	9-12	12-16
Centimeters	23-30.5	30.5-40.5

Materiaal en samenstelling:

- Vierwegs gebreid met Flex Tech Polyester (FTP)

Was- en onderhoudsinstructies:



Alleen
handwas



Wassen met koud
zeepsop



Alleen in schaduw
aan lucht drogen



Niet
strijken



Niet
bleken



Volledig laten drogen
voor gebruik

ElbowFit-Press™

Elleboogcompressiebrace

Waarschuwingen / contra-indicaties:

Gebruik de ondersteunende brace niet bij:

- Ernstige bandrupturen waarvoor operatief herstel nodig is.
- Breuken waarvoor rigide immobilisatie nodig is.
- Ernstige perifere arteriële vaatziekte.
- Huidinfecties of open wonden op de plaats van toepassing.
- Bekende allergie voor een van de gebruikte materialen.

Aanvullende voorzorgsmaatregelen:

- Draag de brace niet langer dan 8 uur aaneengesloten.
- Niet dragen tijdens het slapen.
- Stop het gebruik bij een allergische reactie, zoals blaren, branderig gevoel of jeuk, en raadpleeg een arts.

Raadpleeg voor gebruik altijd uw arts of fysiotherapeut en volg hun specifieke advies.

VitaBrace

Productinformatie & ondersteuning

www.vitabrace.nl



ElbowFit-Press™

Elleboogcompressiebrace

Verkocht en ondersteund door

VitaBrace

www.vitabrace.nl



ElbowFit-Press™

Productinformatie & ondersteuning

VitaBrace


www.vitabrace.nl

VitaBrace is verkooppunt en aanspreekpunt voor productinformatie en ondersteuning.



ElbowFit-Press™

Elleboogcompressiebrace

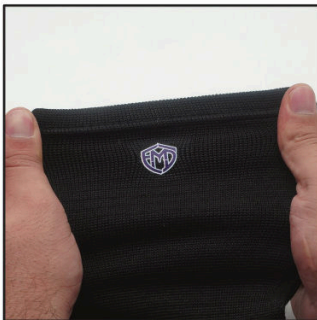

Opslag:

Houd uw brace in een hygiënische staat. Was hem indien nodig. Bewaar de brace wanneer u hem niet gebruikt in het meegeleverde ziplockzakje op een schone, droge en hygiënische plek.

ElbowFit-Press™

Elleboogcompressiebrace

Draaginstructies:



Stap 1: Houd de brace met beide handen vast, met het brede uiteinde naar boven.



Stap 2: Steek uw hand door de sleeve en trek hem voorzichtig over de onderarm omhoog.

ElbowFit-Press™

Elleboogcompressiebrace

Draaginstructies:



Stap 3: Plaats het middelste deel over het ellebooggewricht. Strijk eventuele plooien glad en stel af tot het comfortabel zit.

Tip: Voor een optimaal effect moet de brace goed om de elleboog sluiten, zonder de bloedsomloop af te knellen.

ElbowFit-PressTM

Elleboogcompressiebrace

VitaBrace

Volledige productinformatie

www.vitabrace.nl

Disclaimer:

Deze informatie is uitsluitend bedoeld als algemene product- en gebruiksinformatie. De ElbowFit-Press is een medisch hulpmiddel van klasse I. Het product is bedoeld ter ondersteuning bij het omgaan met klachten en vervangt geen professionele medische diagnose of behandeling. Raadpleeg bij vragen over een medische aandoening altijd uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener.

www.vitabrace.nl