



**Tegendruk
voor pees-
ontlasting**

ElbowFit-Strap™
Elleboogcompressieband

ElbowFit-Strap™

Elleboogcompressieband



Productomschrijving:

Product-SKU:

01040101061

Productcategorie:

Verstelbare compressiebrace van neopreen met schuimkussen.

Lichaamsdeel:

Elleboog

Productoverzicht:

De ElbowFit-Strap is een slanke tegendrukband die gerichte druk uitoefent op de strekkers of buigers van de onderarm en zo de belasting van de epicondylen helpt verminderen.

Doel: Geeft gerichte druk op de onderarmspieren, voor verlichting bij tenniselleboog (laterale epicondylitis) en golferselleboog (mediale epicondylitis).

Ontwerp: Een slanke, universeel passende verstelbare band met een speciaal compressiekussen voor nauwkeurige plaatsing.

Comfort: Gemaakt van zachte, ademende materialen met een slank profiel dat gemakkelijk onder kleding past zonder de natuurlijke beweging te beperken.

Algemeen: Een veelzijdig hulpmiddel voor dagelijkse verlichting, ontwikkeld om peesbelasting tijdens werk, sport of revalidatie te verminderen.

ElbowFit-Strap™

Elleboogcompressieband

Onderdelen van de brace:



A. Kunststof lus:

Geeft doorgang aan de compressieband, zodat het ondersteuningsniveau instelbaar is.



B. Gericht compressiekussen van schuim:

Oefent gerichte druk uit op het aangedane punt van de onderarm.

C. Slanke behuizing van neopreen:

Comfortabel en ademend voor dagelijks dragen.

D. Verstelbare compressieband:

Maakt het ondersteuningsniveau instelbaar.

ElbowFit-Strap™

Elleboogcompressieband

Eigenschappen en voordelen:

- Ergonomisch ontwerp.
- Verstelbare band voor een pasvorm en compressieniveau op maat.
- Het schuimkussen geeft gerichte compressie precies waar dat nodig is.
- Lichtgewicht en zacht.
- Eenvoudig te dragen.
- Uniseks en geschikt voor beide armen.
- Discreet te dragen onder de meeste kleding.
- Ook eenvoudig over kleding aan te brengen en te verwijderen.
- Tot maximaal 8 uur aaneengesloten te dragen.



ElbowFit-Strap™

Elleboogcompressieband

Indicaties:

Laterale en mediale epicondylitis, oftewel tenniselleboog en golferselleboog, zijn degeneratieve peesaandoeningen die ontstaan door herhaald grijpen, strekken van de pols of het werken met gereedschap. Beide gaan gepaard met plaatselijke pijn 1 tot 2 cm onder de epicondylen, stijfheid en minder knijpkracht. Deze elleboogband werkt met tegendruk en is geschikt om de klachten te verlichten bij:

1. Overbelasting en peesaandoeningen:

- Laterale epicondylitis of epicondylalgie, door werk of sport.
- Mediale epicondylitis of epicondylalgie, door werk of sport.
- Voorkomen van terugkeer van klachten bij hervatting van sport of werk.

2. Herstel en revalidatie:

- Functionele ondersteuning na een opvlamming, zodra de fase van rust of cryotherapie voorbij is.
- Na een behandeling, wanneer uw zorgverlener een band adviseert.

3. Taakgerichte ondersteuning:

- Werk met herhaald grijpen, trillingen of gereedschap, zoals timmerwerk, loodgieterswerk, montagewerk en intensief toetsenbord- en muisgebruik.
- Racket- en werpsporten en krachtraining, terwijl techniek en belasting weer worden opgebouwd.

4. Lichte pijn aan de buitenzijde van de elleboog zonder duidelijke oorzaak:

- Gebruik nadat een arts of fysiotherapeut de oorzaak van de klachten heeft beoordeeld en heeft aangegeven dat een band passend is.

ElbowFit-Strap™

Elleboogcompressieband

Maatinformatie:

Beschikbaar in:

- One size - past de meeste gebruikers

Materiaal en samenstelling:

- Neopreenschuim met nylonstof
- Schuimkussen

Was- en onderhoudsinstructies:



Alleen
handwas



Wassen met koud
zeepsop



Alleen in schaduw
aan lucht drogen



Niet
strijken



Niet
bleken



Volledig laten drogen
voor gebruik

ElbowFit-Strap™

Elleboogcompressieband

Waarschuwingen / contra-indicaties:

Gebruik de ondersteunende brace niet bij:

- Ernstige open wonden, huidinfecties of zweren op of rond de elleboog.
- Circulatiestoornissen, zoals perifere arterieel vaatlijden, tenzij een arts anders adviseert.
- Ernstige misvorming van de elleboog waardoor de brace niet goed past.
- Allergie voor neopreen of andere in de brace gebruikte materialen.
- Gevoelloosheid, tintelingen of toenemende pijn tijdens het dragen.

Aanvullende voorzorgsmaatregelen:

- Draag de brace niet langer dan 8 uur aaneengesloten.
- Niet dragen tijdens het slapen.
- Stop het gebruik bij een allergische reactie, zoals blaren, branderig gevoel of jeuk, en raadpleeg een arts.

Raadpleeg voor gebruik altijd uw arts of fysiotherapeut en volg hun specifieke advies.

VitaBrace

Productinformatie & ondersteuning

www.vitabrace.nl



Elbow**Fit**-StrapTM

Elleboogcompressieband

Verkocht en ondersteund door

Vita**Brace**

www.vitabrace.nl



ElbowFit-Strap™

Productinformatie & ondersteuning

VitaBrace

www.vitabrace.nl

VitaBrace is verkooppunt en aanspreekpunt voor productinformatie
en ondersteuning.



ElbowFit-Strap™

Elleboogcompressieband




Opslag:

Houd uw brace in een hygiënische staat. Was hem indien nodig. Bewaar de brace wanneer u hem niet gebruikt in het meegeleverde ziplockzakje op een schone, droge en hygiënische plek.

ElbowFit-Strap™

Elleboogcompressieband

Draaginstructies:

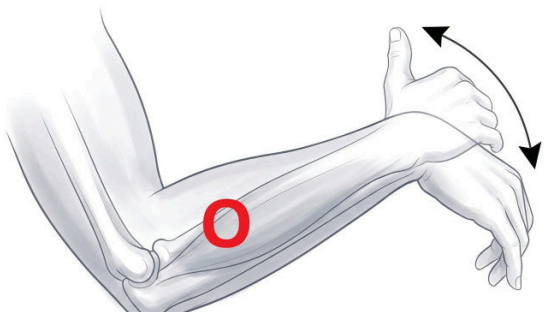

Stap 1: Buig de pols zijwaarts om de spier aan de buitenzijde of de binnenzijde van de onderarm te vinden, 2 tot 3 cm onder de elleboog, afhankelijk van uw klachten.



Stap 2: Draag de band om de onderarm en plaats het schuimkussen over de spier, 2 tot 3 cm onder de elleboog.

ElbowFit-Strap™

Elleboogcompressieband

Draaginstructies:



Stap 3: Zet de band stevig vast met het klittenband.

Tip: Voor een optimaal effect moet de band voldoende druk geven op de aangedane pees, zonder de bloedsomloop af te knellen.

ElbowFit-Strap™

Elleboogcompressieband

VitaBrace

Volledige productinformatie

www.vitabrace.nl

Disclaimer:

Deze informatie is uitsluitend bedoeld als algemene product- en gebruiksinformatie. De ElbowFit-Strap is een medisch hulpmiddel van klasse I. Het product is bedoeld ter ondersteuning bij het omgaan met klachten en vervangt geen professionele medische diagnose of behandeling. Raadpleeg bij vragen over een medische aandoening altijd uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener.

www.vitabrace.nl