




**Dubbele metalen
scharnieren**

GenuFit-Hinge™
Kniestabilisator met scharnieren

GenuFit-Hinge™

Kniestabilisator met scharnieren

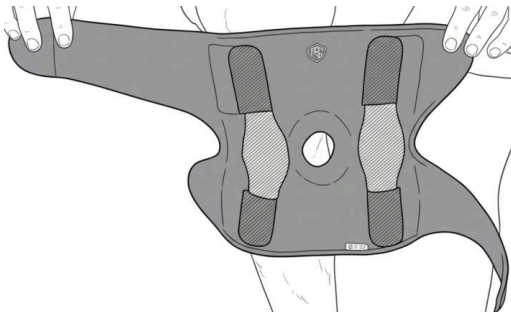

Productomschrijving:

Product-SKU:

01100201021

Productcategorie:

Neopreen met metalen scharnieren, open wikkelformaat.

Lichaamsdeel:

Knie

Productoverzicht:

De GenuFit-Hinge is een ondersteunende kniebrace met scharnieren, voor geblesseerde, zwakke of herstellende knieën.

Doel: Biedt stabiliteit, bescherming en gecontroleerde beweging.

Ontwerp: Maakt gebruik van scharnieren aan beide zijden die overstrekking en zijwaartse beweging helpen beperken.

Comfort: Voorzien van een zachte binnenvoering voor langdurig dragen en een patella-opening met schuimring die de knieschijf op zijn plaats houdt.

Algemeen: Combineert effectieve stabilisatie met comfort voor veilige beweeglijkheid.

GenuFit-Hinge™

Kniestabilisator met scharnieren

Onderdelen van de brace:



A. Premium neopreen:

Houdt warmte vast en zorgt voor comfortabel dragen.

B. Patella-opening met schuimring:

Houdt de knieschijf op zijn plaats en geeft extra stabiliteit.

C. Metalen scharnieren:

Laten buigen en strekken toe, maar voorkomen mediolaterale instabiliteit en hyperextensie. De schuimbekleding voorkomt schuren door het bewegende metaal.

D. Verstelbare banden:

Met een microsluiting van klittenband, zodat de compressie naar wens kan worden ingesteld.

E. Zachte pluchen binnenvoering:

Zorgt voor extra comfort tijdens het dragen.

GenuFit-Hinge™

Kniestabilisator met scharnieren

Eigenschappen en voordelen:

- Biedt stevige mediale en laterale kniestabiliteit door geïntegreerde zijscharnieren, die ongewenste zijwaartse beweging helpen beperken.
- Kan de knie ondersteunen bij klachten van de banden (ACL, PCL, MCL of LCL), op advies van een zorgverlener.
- Het open patella-ontwerp helpt de druk op de knieschijf te verminderen en bevordert een goed patellaverloop.
- Matige, gelijkmatige compressie helpt zwelling te verminderen en verbetert de proprioceptie.
- Laat natuurlijke buiging en strekking van de knie toe en biedt stabiliteit zonder de beweeglijkheid sterk te beperken.
- Helpt pijn en instabiliteit tijdens activiteit te verminderen, geschikt voor sport, werk en dagelijks gebruik.
- Bruikbaar tijdens revalidatie en herstel na letsel, met ondersteuning van gecontroleerde beweging naarmate de kracht terugkeert.
- Het verstelbare wikkeldontwerp zorgt voor een goede, op maat instelbare pasvorm en eenvoudige toepassing.
- Kan onder ruimzittende kleding worden gedragen dankzij de functionele, slanke constructie.
- Het open wikkeldontwerp is eenvoudig in gebruik voor mensen met rugklachten, zwangerschap of overgewicht, die moeilijk kunnen bukken om de brace over de voet te trekken. De brace is eenvoudig aan te brengen en te verwijderen over kleding, ook buitenshuis.
- Eenvoudig te verwijderen voor vliegreizigers voordat zij door de veiligheidscontrole gaan.

GenuFit-Hinge™

Kniestabilisator met scharnieren

Indicaties:

De belangrijkste indicatie is het bieden van stabiliteit en gecontroleerde beweging bij bandletsel of instabiliteit van de knie, meestal na letsel van de MCL of LCL of na een knieoperatie, om herstellende structuren te beschermen en afwijkende gewrichtsbeweging te voorkomen. De brace is ook bruikbaar bij het herstel van letsel aan de ACL of PCL.

De specifieke indicaties staan hieronder vermeld:

1. Bandletsel:

- Lichte tot matige verstuikingen of gedeeltelijke scheuren van de MCL of LCL.
- Lichte tot matige verstuikingen of gedeeltelijke scheuren van de ACL of PCL.
- Stabilisatie na letsel om verdere schade te voorkomen.

2. Bescherming na een operatie:

- Na reconstructie of herstel van een band.
- Na een meniscusherstel of arthroscopische ingreep.
- Gecontroleerde mobilisatie tijdens de revalidatie.

3. Instabiliteit van de knie:

- Functionele instabiliteit door chronische laxiteit van de banden.
- Terugkerende episodes waarbij de knie door zakt.

4. Degeneratieve of ontstekingsgerelateerde aandoeningen:

- Artrose, met name ontlasting van het mediale of laterale compartiment met scharnierende ondersteuning.
- Reumatoïde artritis of inflammatoire gewrichtsaandoeningen die instabiliteit veroorzaken.

5. Preventieve ondersteuning:

- Activiteiten met verhoogd risico of sporten zoals hiken.
- Helpt overstrekking en overmatige zijwaartse belasting te beperken.

6. Overige toepassingen:

- Stoornissen in het patellaverloop met bijkomende instabiliteit.
- Algemene zwakte van de knie bij ouderen of na een trauma.
- Stabilisatie na letsel om verdere schade te voorkomen.

GenuFit-Hinge™

Kniestabilisator met scharnieren

Maatinformatie:

- One size - past de meeste gebruikers
- Verstelbaar met klittenband voor een pasvorm op maat

Materiaal en samenstelling:

- **Neopreen** (voor compressie en ondersteuning)
- **Metalen scharnieren** (voor stabiliteit)
- **Nylonplush** (voor comfort)
- **Klittenband** (voor het microsluitingssysteem)

Was- en onderhoudsinstructies:

Let op: Verwijder de scharnieren voor het wassen en plaats ze terug wanneer de brace volledig droog is.



**Alleen
handwas**



**Wassen met koud
zeepsop**



**Alleen in schaduw
aan lucht drogen**



**Niet
strijken**



**Niet
bleken**



**Volledig laten drogen
voor gebruik**

GenuFit-Hinge™

Kniestabilisator met scharnieren

Waarschuwingen / contra-indicaties:

Gebruik de ondersteunende brace niet bij:

- Ernstige bandrupturen waarvoor operatief herstel nodig is.
- Breuken waarvoor rigide immobilisatie nodig is.
- Ernstige perifere arteriële vaatziekte.
- Huidinfecties of open wonden op de plaats van toepassing.
- Bekende allergie voor neopreen, nylon, metaal of een van de andere gebruikte materialen.

Aanvullende voorzorgsmaatregelen:

- Draag de brace niet langer dan 8 uur aaneengesloten.
- Niet dragen tijdens het slapen.
- Stop het gebruik direct bij een allergische reactie, zoals blaren, branderig gevoel, jeuk of roodheid, en raadpleeg een arts.

Raadpleeg voor gebruik altijd uw arts of fysiotherapeut en volg hun specifieke advies.

VitaBrace

Productinformatie & ondersteuning

www.vitabrace.nl



GenuFit-Hinge™

Kniestabilisator met scharnieren

Verkocht en ondersteund door

VitaBrace

www.vitabrace.nl



GenuFit-Hinge™

Productinformatie & ondersteuning

VitaBrace

www.vitabrace.nl

VitaBrace is verkooppunt en aanspreekpunt voor productinformatie
en ondersteuning.



GenuFit-Hinge™

Kniestabilisator met scharnieren




Opslag:

Houd uw brace in een hygiënische staat. Was hem indien nodig. Bewaar de brace wanneer u hem niet gebruikt in het meegeleverde ziplockzakje op een schone, droge en hygiënische plek.


GenuFit-Hinge™

Kniestabilisator met scharnieren

Draaginstructies:

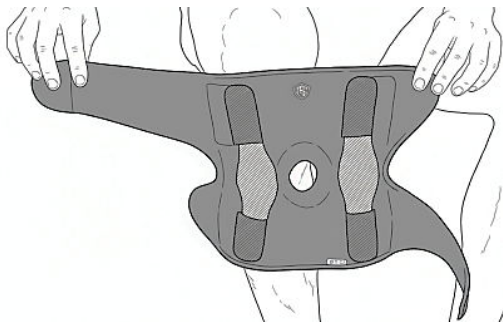

Stap 1: Houd de geopende brace met beide handen vast.

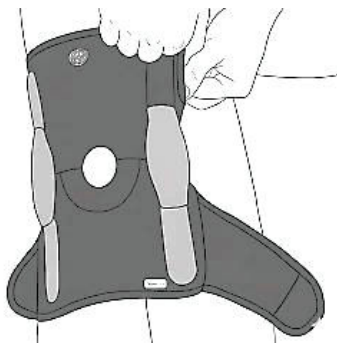


Stap 2: Plaats de brace op de voorzijde van uw knie en wikkel hem om het been.


GenuFit-Hinge™

Kniestabilisator met scharnieren

Draaginstructies:

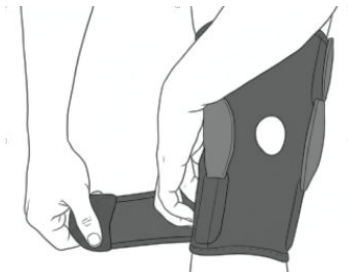

Stap 3: Zet de flappen vast met de klittenbanden aan de achterzijde van de knie.

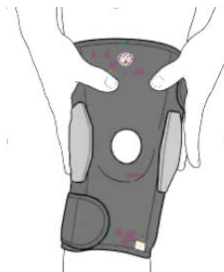

Stap 4: Beweeg uw knie licht om de pasvorm bij te stellen en zorg voor een comfortabele pasvorm die niet te strak zit.

Tip: Lijn de scharnieren ongeveer uit met de zijkanten van uw kniegewricht voor een optimale werking.

GenuFit-Hinge™

Kniestabilisator met scharnieren

VitaBrace

Volledige productinformatie

www.vitabrace.nl

Disclaimer:

Deze informatie is uitsluitend bedoeld als algemene product- en gebruiksinformatie. De GenuFit-Hinge is een medisch hulpmiddel van klasse I. Het product is bedoeld ter ondersteuning bij het omgaan met klachten en vervangt geen professionele medische diagnose of behandeling. Raadpleeg bij vragen over een medische aandoening altijd uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener.

www.vitabrace.nl