




**Geavanceerde
patella-
ondersteuning**

GenuFit-PressPro™
Verstelbare kniecompressiebrace

GenuFit-PressPro™

Verstelbare kniecompressiebrace

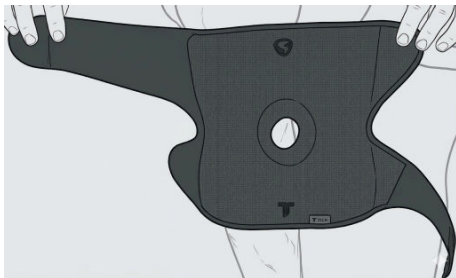

Productomschrijving:

Product-SKU:

01100101011

Productcategorie:

Verstelbare compressiebrace van neopreen.

Lichaamsdeel:

Knie

Productoverzicht:

De GenuFit-PressPro is een ondersteunende kniebrace voor geblesseerde, zwakke of herstellende knieën. De belangrijkste eigenschappen zijn:

Doel: Biedt warmte, ondersteuning en gedoseerde compressie.

Ontwerp: Gemaakt van zacht neopreen, met verstelbare banden en een versterkte patella-opening voor eenvoudige ondersteuning van de knie.

Comfort: Voorzien van een zachte binnenvoering voor langdurig dragen en een patella-opening met schuimring die de knieschijf op zijn plaats houdt.

Algemeen: Combineert effectieve ondersteuning met comfort voor veilige beweeglijkheid.

GenuFit-PressPro™

Verstelbare kniecompressiebrace

Onderdelen van de brace:



A. Premium neopreen:

Houdt warmte vast en zorgt voor comfortabel dragen.

B. Patella-opening met schuimring:

Houdt de knieschijf op zijn plaats en geeft extra stabiliteit.

C. Binnenvoering:

Zachte voering die comfortabel aanvoelt tegen de huid tijdens langdurig dragen.

D. Verstelbare banden:

Met een microsluiting van klittenband, zodat de compressie naar wens kan worden ingesteld.

E. Zachte pluchen binnenvoering:

Zorgt voor extra comfort tijdens het dragen.

GenuFit-PressPro™

Verstelbare kniecompressiebrace


Eigenschappen en voordelen:

- Ergonomisch ontwerp ondersteunt de natuurlijke stand van de knie en het comfort tijdens gebruik.
- Verstelbare banden zorgen voor een goede, op maat instelbare pasvorm en gedoseerde compressie.
- Lichtgewicht constructie verhoogt het comfort bij langdurig dragen.
- Eenvoudig aan te brengen wikkelontwerp maakt aanbrengen en verwijderen makkelijk.
- Geschikt voor zowel de linker- als de rechterknie, veelzijdig en uniseks in gebruik.
- Slank ontwerp maakt discreet dragen onder de meeste kleding mogelijk.

Kan over kleding worden aangebracht of verwijderd, wat het gebruik buitenshuis vergemakkelijkt.

Het wikkelontwerp maakt aanbrengen mogelijk zonder de knie ver te hoeven buigen.

Geschikt voor gebruik tot maximaal 8 uur, afhankelijk van comfort en medisch advies.

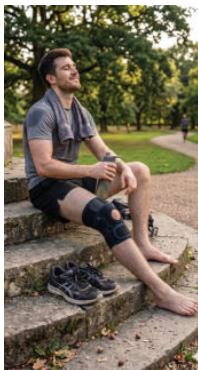

GenuFit-PressPro™

Verstelbare kniecompressiebrace

Indicaties:

De belangrijkste indicatie is het bieden van ondersteuning, warmte en gedoseerde compressie bij bandletsel of instabiliteit van de knie, meestal na letsel van de MCL of LCL of na een knieoperatie, om herstellende structuren te beschermen en afwijkende gewrichtsbeweging te voorkomen.

De specifieke indicaties staan hieronder vermeld:

1. Ondersteuning en stabiliteit:

- Lichte tot matige instabiliteit van de knie.
- Neiging tot patellaire maltracking of lichte patellaluxatie.
- Algemene laxiteit van het gewricht.

2. Pijnverlichting:

- Pijn aan de voorzijde van de knie (patellofemoraal pijnsyndroom).
- Lichte artrose van de knie.
- Overbelastingssyndromen, zoals runner's knee en jumper's knee.
- Pijn door bandletsel of lichte meniscusirritatie.

3. Na letsel en revalidatie:

- Na lichte bandverstuikingen, ter ondersteuning van de MCL of LCL.
- Na behandeling van een patellaluxatie.
- Tijdens revalidatieoefeningen voor geleidelijke hervatting van activiteit.
- Na een artroscopie of kleine knie-ingreep, onder medisch advies.

4. Zwelling en compressie:

- Helpt lichte zwelling of vochtophoping te beheersen.
- Geeft rondomcompressie om de proprioceptie te verbeteren.
- Beheersing van zwelling na inspanning bij chronisch letsel.

5. Sport en activiteit:

- Preventieve ondersteuning bij activiteiten met verhoogd risico, zoals basketbal, voetbal en skiën.
- Ondersteuning van het patellaverloop bij sporters.
- Voorkomen van hernieuwd letsel bij terugkeer naar sport.

GenuFit-PressPro™

Verstelbare kniecompressiebrace

Maatinformatie:

- One size - past de meeste gebruikers
- Verstelbaar met klittenband voor een pasvorm op maat

Materiaal en samenstelling:

- **Neopreen** (voor compressie en ondersteuning)
- **Nylonplush** (voor comfort)
- **Klittenband** (voor het microsluitingssysteem)

Was- en onderhoudsinstructies:



Alleen
handwas



Wassen met koud
zeepsop



Alleen in schaduw
aan lucht drogen



Niet
strijken



Niet
bleken



Volledig laten drogen
voor gebruik

GenuFit-PressPro™

Verstelbare kniecompressiebrace

Waarschuwingen / contra-indicaties:

Gebruik de ondersteunende brace niet bij:

- Ernstige open wonden, huidinfecties of zweren op of rond de knie.
- Circulatiestoornissen, zoals ernstige spataderen of perifeer arterieel vaatlijden, tenzij een arts anders adviseert.
- Ernstige misvorming van de knie waardoor de brace niet goed kan worden aangebracht.
- Bekende allergie voor neopreen of andere in de brace gebruikte materialen.
- Gevoelloosheid, tintelingen of toenemende pijn tijdens het dragen. Verwijder de brace direct en raadpleeg uw arts.

Aanvullende voorzorgsmaatregelen:

- Draag de brace niet langer dan 8 uur aaneengesloten.
- Niet dragen tijdens het slapen.
- Stop het gebruik bij een allergische reactie, zoals blaren, branderig gevoel of jeuk, en raadpleeg een arts.

Raadpleeg voor gebruik altijd uw arts of fysiotherapeut en volg hun specifieke advies.

VitaBrace

Productinformatie & ondersteuning

www.vitabrace.nl



Genu**Fit**-PressPro™

Verstelbare kniecompressiebrace

Verkocht en ondersteund door

Vita**Brace**

www.vitabrace.nl



GenuFit-PressPro™

Productinformatie & ondersteuning

VitaBrace

www.vitabrace.nl

VitaBrace is verkooppunt en aanspreekpunt voor productinformatie
en ondersteuning.



GenuFit-PressPro™

Verstelbare kniecompressiebrace




Opslag:

Houd uw brace in een hygiënische staat. Was hem indien nodig. Bewaar de brace wanneer u hem niet gebruikt in het meegeleverde ziplockzakje op een schone, droge en hygiënische plek.

GenuFit-PressPro™

Verstelbare kniecompressiebrace

Draaginstructies:

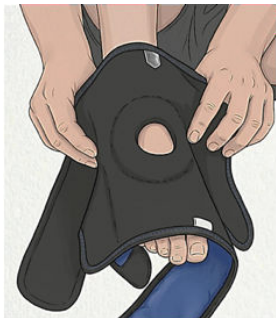

Stap 1: Houd de geopende brace met beide handen vast. Plaats uw voet tussen de brace en de zachte binnenvoering.




Stap 2: Schuif de brace omhoog tot de patella-opening op uw knieschijf is uitgelijnd.


GenuFit-PressPro™

Verstelbare kniecompressiebrace

Draaginstructies:

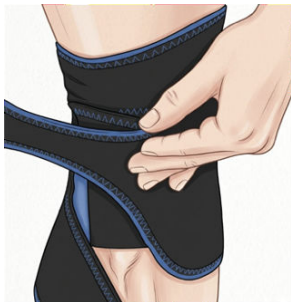

Stap 3: Zet de flappen vast met de klittenbanden aan de achterzijde van de knie.

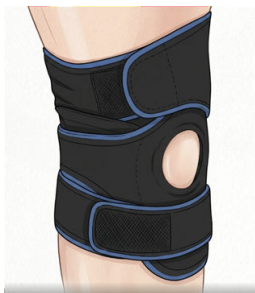

Stap 4: Trek de banden strakker of maak ze losser tot de brace comfortabel zit en goed ondersteunt.

Tip: Lijn de patella-opening ongeveer uit met uw kniegewricht voor een optimale werking.

GenuFit-PressPro™

Verstelbare kniecompressiebrace

VitaBrace

Volledige productinformatie

www.vitabrace.nl

Disclaimer:

Deze informatie is uitsluitend bedoeld als algemene product- en gebruiksinformatie. De GenuFit-PressPro is een medisch hulpmiddel van klasse I. Het product is bedoeld ter ondersteuning bij het omgaan met klachten en vervangt geen professionele medische diagnose of behandeling. Raadpleeg bij vragen over een medische aandoening altijd uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener.

www.vitabrace.nl