


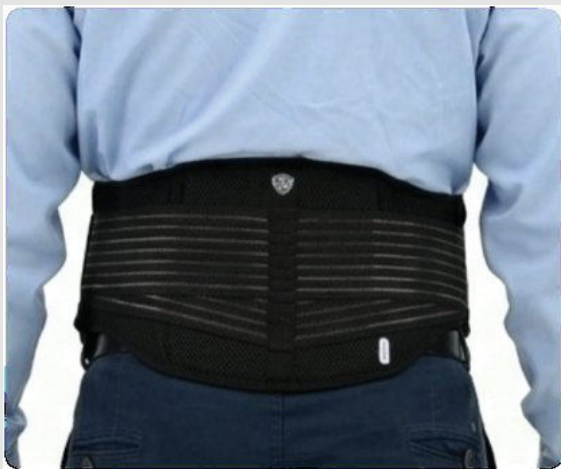

Anatomisch
gecontoureerd
steunkussen

LumboFit-Contour™
Gecontoureerde lumbale steunband

LumboFit-Contour™

Gecontoureerde lumbale steunband



Productomschrijving:

Product-SKU:

01160107031

Productcategorie:

Premium gecontoureerde lumbale steunband met instelbare compressie.

Lichaamsdeel:

Onderrug

Productoverzicht:

De LumboFit-Contour is een gecontoureerde lumbale steunband, ontworpen voor gerichte ondersteuning en comfort van de onderrug.

Doel: Geeft gerichte ondersteuning en verlichting van de onderrug tijdens dagelijkse bezigheden, langdurige houdingen of herstel van musculoskeletale overbelasting.

Ontwerp: Uitgevoerd met een anatomisch gecontoureerd achterkussen en verstelbare buitenste compressiebanden voor een pasvorm op maat.

Comfort: Volgt de natuurlijke welving van het lumbosacrale gebied, voor ergonomisch gemak gedurende de hele dag.

Algemeen: Een gespecialiseerde lumbale steunband die anatomische nauwkeurigheid combineert met instelbare compressie voor betrouwbare stabiliteit van de wervelkolom.

LumboFit-Contour™

Gecontoureerde lumbale steunband

Onderdelen van de brace:



A. Premium neopreen behuizing:

Verhoogt het comfort bij langdurig dragen.

B. Anatomisch gecontoureerd achterkussen:

Volgt de natuurlijke lumbosacrale welving voor gerichte ondersteuning.

C. Verstelbare elastische compressiebanden:

Maken compressie op maat rondom mogelijk, afgestemd op de activiteit.

D. Microsluitingssysteem aan de voorzijde:

Zorgt voor een stevige en verstelbare sluiting.

LumboFit-Contour™

Gecontoureerde lumbale steunband

Eigenschappen en voordelen:

- Zwarte lumbale steunband met ergonomische contouren.
- Anatomisch gecontoureerd achterkussen dat aansluit op de lumbosacrale welving.
- Gevoerde, stevige stabiliserende kussens, gericht op vermoeide rugspieren.
- Ademend meshmateriaal voor betere luchtdoorstroming en comfort.
- Verstelbare elastische buitenste compressiebanden voor een pasvorm op maat.
- Klittenbandsluiting aan de voorzijde.
- Afgewerkte randen voor duurzaamheid en huidcomfort.



LumboFit-Contour™

Gecontoureerde lumbale steunband

Indicaties:

De LumboFit-Contour is bedoeld voor mensen die uitwendige lumbale ondersteuning en compressie nodig hebben, waaronder:

- Lichte tot matige lage rugpijn van musculoskeletale oorsprong.
- Spierverrekking, verstuiking of vermoeidheid van de lage rug.
- Houdingsgerelateerde belasting door lang zitten of staan.
- Mechanisch ongemak van de lage rug bij dagelijkse of beroepsmatige bezigheden.
- Ondersteuning tijdens het herstel van licht lumbaal letsel, op advies van een zorgverlener.
- Algemene lumbale ondersteuning bij gewone lichamelijke taken.

Het meest geschikt voor:

- Volwassenen met ongemak of vermoeidheid in de onderrug.
- Kantoormedewerkers en mensen met een zittend werkpatroon.
- Mensen die ondersteunende compressie nodig hebben bij dagelijkse bezigheden.
- Gebruikers die een gecontoureerde en comfortabele lumbale steunband zoeken.



LumboFit-Contour™

Gecontoureerde lumbale steunband

Maatinformatie:

Beschikbaar in:

- Small/Medium (S/M)
- Large/Extra Large (L/XL)



Buikomtrek ter hoogte van de navel	S/M	L/XL
Inches	30-40	40-50
Centimeters	76-101.5	101.5-127

Materiaal en samenstelling:

- Premium neopreen
- Air mesh
- Evafoam
- Elastische banden
- Microsluitingssysteem met klittenband

Was- en onderhoudsinstructies:



Alleen
handwas



Wassen met koud
zeepsop



Alleen in schaduw
aan lucht drogen



Niet
strijken



Niet
bleken



Volledig laten drogen
voor gebruik

LumboFit-Contour™

Gecontoureerde lumbale steunband

Waarschuwingen / contra-indicaties:

Gebruik de ondersteunende brace niet bij:

- Acut ernstig letsel aan de wervelkolom of instabiele breuken.
- Toenemende neurologische uitval.
- Ernstige radiculopathie.
- Huidinfecties of wonden onder de brace.
- Overgevoeligheid of allergie voor neopreen.

Aanvullende voorzorgsmaatregelen:

- Breng geen overmatige compressie aan.
- Stop het gebruik bij gevoelloosheid of toenemend ongemak.
- Bij langdurig gebruik wordt begeleiding door een zorgverlener aanbevolen.

Raadpleeg voor gebruik altijd uw arts of fysiotherapeut en volg hun specifieke advies.

VitaBrace

Productinformatie & ondersteuning

www.vitabrace.nl



LumboFit-Contour™

Gecontoureerde lumbale steunband

Verkocht en ondersteund door

VitaBrace

www.vitabrace.nl



LumboFit-Contour™

Productinformatie & ondersteuning

VitaBrace

www.vitabrace.nl

VitaBrace is verkooppunt en aanspreekpunt voor productinformatie
en ondersteuning.



LumboFit-Contour™

Gecontoureerde lumbale steunband



Opslag:

Houd uw brace in een hygiënische staat. Was hem indien nodig. Bewaar de brace wanneer u hem niet gebruikt in het meegeleverde ziplockzakje op een schone, droge en hygiënische plek.


LumboFit-Contour™

Gecontoureerde lumbale steunband

Draaginstructies:



Stap 1: Plaats de brace rond de onderrug, met de gebogen rand naar beneden gericht, zodat hij aansluit op het lumbosacrale gebied.

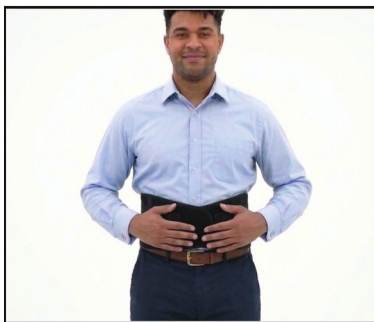

Stap 2: Wikkel de hoofdband rond de taille en sluit hem aan de voorzijde onder de navel met het klittenband.

LumboFit-Contour™

Gecontoureerde lumbale steunband

Draaginstructies:



Stap 3: Trek de verstelbare buitenste compressiebanden aan beide zijden naar voren.



Stap 4: Zet de compressiebanden vast tot een stevige maar comfortabele pasvorm.

Tip: Voor een optimaal effect moet de brace goed aansluiten zonder de ademhaling of de bloedsomloop te belemmeren.

LumboFit-Contour™

Gecontoureerde lumbale steunband

VitaBrace

Volledige productinformatie

www.vitabrace.nl

Disclaimer:

Deze informatie is uitsluitend bedoeld als algemene product- en gebruiksinformatie. De LumboFit-Contour is een medisch hulpmiddel van klasse I. Het product is bedoeld ter ondersteuning bij het omgaan met klachten en vervangt geen professionele medische diagnose of behandeling. Raadpleeg bij vragen over een medische aandoening altijd uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener.

www.vitabrace.nl