



**Flexibele
ondersteuning
van de wervelkolom**

LumboFit-Flex™

Flexibele lumbale steunband

LumboFit-Flex™

Flexibele lumbale steunband



Productomschrijving:

Product-SKU:

01160107021

Productcategorie:

Premium flexibele lumbale steunband van polymeer met versterkte compressie.

Lichaamsdeel:

Onderrug

Productoverzicht:

De LumboFit-Flex is een premium lumbale steunbrace, ontworpen voor gerichte stabilisatie van de onderrug en instelbare compressie.

Doel: Premium lumbale brace die gerichte stabilisatie van de onderrug en instelbare compressie geeft via flexibele metalen steunen en verstelbare banden.

Ontwerp: De brace heeft acht naast elkaar ingestikte flexibele metalen steunen in de achterste middenlijn, die gestructureerde ondersteuning geven en tegelijk gecontroleerde beweeglijkheid toelaten.

Comfort: Een stevige hoofdband zet de brace vast rond de onderrug en de buik, terwijl de verstelbare buitenste compressiebanden de lumbale ondersteuning versterken met compressie op maat.

Algemeen: De brace is bedoeld voor dagelijks gebruik tijdens gewone bezigheden, revalidatie en werkgerelateerde taken.

LumboFit-Flex™

Flexibele lumbale steunband

Onderdelen van de brace:



A. Acht flexibele metalen steunen:

Uitgelijnd in de achterste middenlijn versterken zij de lumbale wervelkolom door overmatige buiging, strekking en rotatie te beperken, met behoud van functionele beweeglijkheid.

B. De brede hoofdband:

Wordt aan de voorzijde gesloten en geeft gelijkmatige compressie rondom de onderrug en de onderbuik, wat de uitlijning van de wervelkolom en de verdeling van de belasting over het lumbale gebied ondersteunt.

C. Verstelbare buitenste compressiebanden:

Maken geleidelijke, op maat instelbare compressie mogelijk. Dit kan de belasting van de lage rugspieren en de wervelkolom helpen verminderen.

LumboFit-Flex™

Flexibele lumbale steunband

Eigenschappen en voordelen:

Acht flexibele metalen steunen:

Geven gestructureerde lumbale stabilisatie met behoud van gecontroleerde beweging.

Dubbel compressiesysteem:

Hoofdband met elastische buitenbanden maakt instelbare, geleidelijke compressie mogelijk.

Betere lumbale controle:

Helpt overmatige buiging, strekking en rotatiebelasting te beperken.

Betere verdeling van de belasting:

Ondersteunt de uitlijning van de wervelkolom en vermindert de mechanische belasting van de lumbale spieren.

Duurzame constructie en premium stikwerk:

Geeft stevige ondersteuning, warmte en een lange levensduur.



Verstelbare pasvorm met stevige sluiting:

Zorgt voor compressie op maat en een stabiele positie van de brace.

Geschikt voor dagelijks gebruik en activiteit:

Ontworpen voor werk, revalidatie en langdurige lumbale ondersteuning.


LumboFit-Flex™

Flexibele lumbale steunband

Indicaties:

De LumboFit-Flex geeft lichte tot matige lumbale ondersteuning bij:

- Mechanische lage rugpijn waarbij extra stabilisatie nodig is.
- Spierverrekking of spasme van de lage rug.
- Lumbale spondylose met functionele instabiliteit.
- Degeneratieve lumbale discusaandoening, niet in de acute fase.
- Chronische of terugkerende niet-radicaire lage rugpijn.
- Houdingsinstabiliteit met verhoogde belasting van de lage rug.
- Lumbale belasting door werk of activiteit waarbij gestructureerde ondersteuning nodig is.
- Belasting van het sacro-iliacale gewricht waarbij extra stabilisatie nodig is.
- Ondersteuning tijdens de revalidatie na lumbaal letsel, niet in de acute fase.
- Vroege ondersteuning bij hervatting van activiteit na lumbale overbelasting of licht letsel.

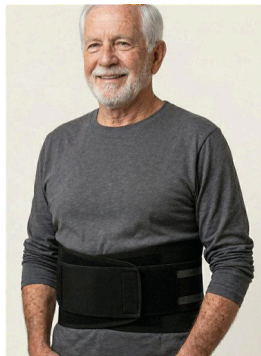

LumboFit-Flex™

Flexibele lumbale steunband

Maatinformatie:

Beschikbaar in:

- One size - past de meeste gebruikers

Materiaal en samenstelling:

- **Polymeerplaten van hoge dichtheid, premium kwaliteit**
- **Neopreen**
- **Flexibele metalen steunen**
- **Microsluitingssysteem met klittenband**

Was- en onderhoudsinstructies:



Alleen
handwas



Wassen met koud
zeepsop



Alleen in schaduw
aan lucht drogen



Niet
strijken



Niet
bleken



Volledig laten drogen
voor gebruik

LumboFit-Flex™

Flexibele lumbale steunband

Waarschuwingen / contra-indicaties:

Gebruik de ondersteunende brace niet bij:

- Acut ernstig letsel aan de wervelkolom of instabiele breuken.
- Toenemende neurologische uitval.
- Ernstige radiculopathie.
- Huidinfecties of wonden onder de brace.
- Overgevoeligheid of allergie voor de gebruikte materialen.

Aanvullende voorzorgsmaatregelen:

- Breng geen overmatige compressie aan.
- Stop het gebruik bij gevoelloosheid of toenemend ongemak.
- Bij langdurig gebruik wordt begeleiding door een zorgverlener aanbevolen.
- Maak de compressiebanden losser wanneer de druk te sterk aanvoelt.

Raadpleeg voor gebruik altijd uw arts of fysiotherapeut en volg hun specifieke advies.

VitaBrace

Productinformatie & ondersteuning

www.vitabrace.nl



LumboFit-Flex™

Flexibele lumbale steunband

Verkocht en ondersteund door

VitaBrace

www.vitabrace.nl



LumboFit-Flex™

Productinformatie & ondersteuning

VitaBrace


www.vitabrace.nl

VitaBrace is verkooppunt en aanspreekpunt voor productinformatie en ondersteuning.



LumboFit-Flex™

Flexibele lumbale steunband

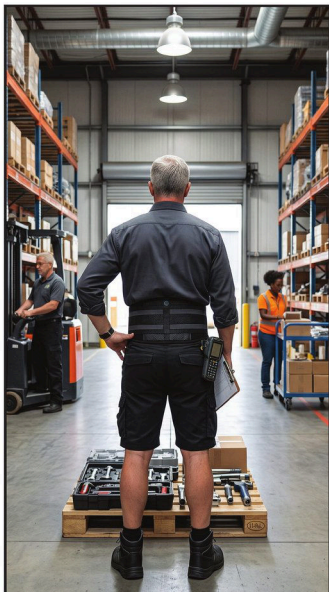


Opslag:

Houd uw brace in een hygiënische staat. Was hem indien nodig. Bewaar de brace wanneer u hem niet gebruikt in het meegeleverde ziplockzakje op een schone, droge en hygiënische plek.



LumboFit-Flex™

Flexibele lumbale steunband

Draaginstructies:

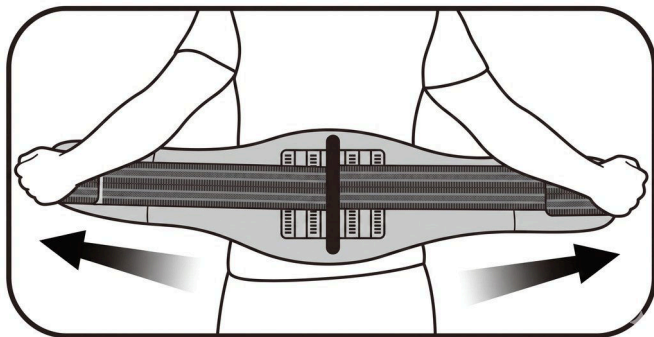

Plaats de band: Plaats de band achter de onderrug, laag genoeg om uit te lijnen met het staartbeen.

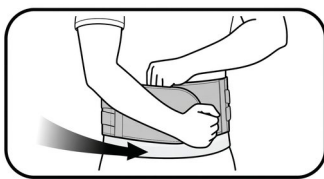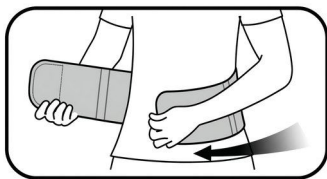


Omwikkelen en vastzetten: Sluit het klittenband aan de voorzijde stevig rond de buik.


LumboFit-Flex™

Flexibele lumbale steunband

Draaginstructies:

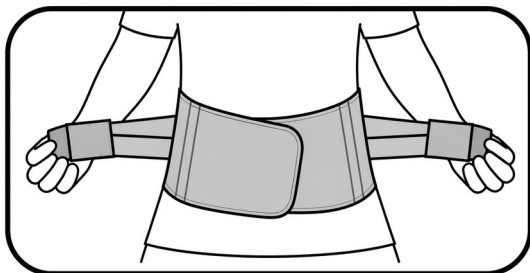

Compressie aanbrengen: Trek de elastische banden van achteren naar voren en zet ze naar wens vast.

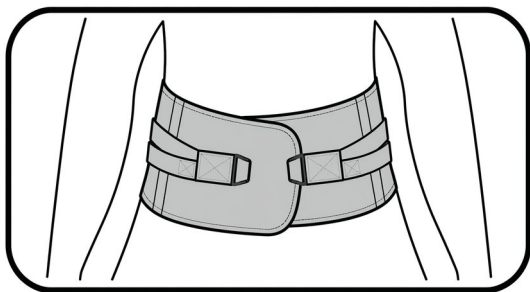

Bijstellen: Zorg voor stabiele maar comfortabele ondersteuning.

Tip: Voor een optimaal effect moet de brace goed aansluiten op het lumbale gebied en dit ondersteunen.

LumboFit-Flex™

Flexibele lumbale steunband

VitaBrace

Volledige productinformatie

www.vitabrace.nl

Disclaimer:

Deze informatie is uitsluitend bedoeld als algemene product- en gebruiksinformatie. De LumboFit-Flex is een medisch hulpmiddel van klasse I. Het product is bedoeld ter ondersteuning bij het omgaan met klachten en vervangt geen professionele medische diagnose of behandeling. Raadpleeg bij vragen over een medische aandoening altijd uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener.

www.vitabrace.nl