


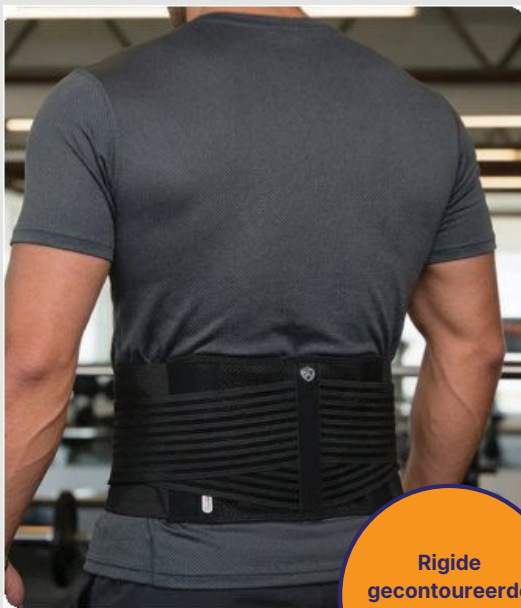

Rigide
gecontoureerde
inlegplaat

LumboFit-Hard™
Rigide lumbale steunbrace

LumboFit-Hard™

Rigide lumbale steunbrace



Productomschrijving:

Product-SKU:

01160107121

Productcategorie:

Premium lumbale brace van neopreen met rigide gecontoureerde inlegplaat.

Lichaamsdeel:

Onderrug

Productoverzicht:

De LumboFit-Hard is een premium lumbale steunbrace, ontworpen voor stevige uitwendige ondersteuning van de lage rug.

Doel: Geeft stevige uitwendige ondersteuning aan de achterzijde van de lage rug.

Ontwerp: Uitgevoerd in hoogwaardig neopreen met verstelbare compressiebanden en een vak voor een rigide, ergonomisch gevormde kunststof plaat met een zachte voering aan de lichaamsszijde.


Comfort: Maakt gebruik van een gevoerd steunkussen en flexibel neopreen om het draagcomfort te behouden en tegelijk de natuurlijke welving van de wervelkolom te volgen.

Algemeen: Een premium, instelbare lumbale brace die rigide structurele ondersteuning combineert met een ergonomische, gebruiksvriendelijke pasvorm.

LumboFit-Hard™

Rigide lumbale steunbrace

Onderdelen van de brace:

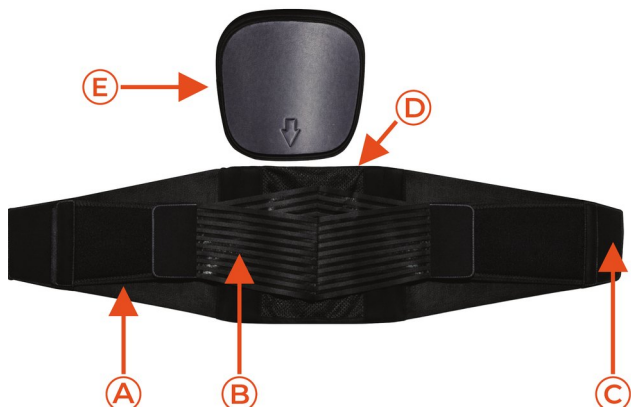

A. Premium neopreen lumbale band:

Geeft gelijkmatige compressie en weldadige warmte aan de onderrug.

B. Elastische compressiebanden:

Maken instelbare versterking mogelijk, afgestemd op activiteit en pijnniveau.

C. Microsluitingssysteem aan de voorzijde:

Zorgt voor een stevige en eenvoudige sluiting.

D. Vak voor de lumbale inlegplaat:

Houdt de rigide plaat op zijn plaats.

E. Rigide gecontoureerde lumbale inlegplaat:


Ondersteunt de natuurlijke lumbosacrale werveling en vermindert spiervermoeidheid. De opgedrukte pijl geeft aan in welke richting de plaat in het vak moet worden geschoven.

LumboFit-Hard™

Rigide lumbale steunbrace

Eigenschappen en voordelen:

- Premium zwarte lumbale band van neopreen.
- Vak aan de achterzijde voor de rigide inlegplaat.
- Rigide kunststof plaat met ergonomische lumbosacrale contour.
- Gevoerde bekleding over de rigide plaat voor comfort.
- Verstelbare elastische buitenste compressiebanden.
- Klittenbandsluiting aan de voorzijde voor de band en de compressiebanden.
- Duurzame, comfortabele constructie, geschikt voor langdurig dragen.
- Ook te dragen als eenvoudige compressieband, dus zonder de rigide inlegplaat.

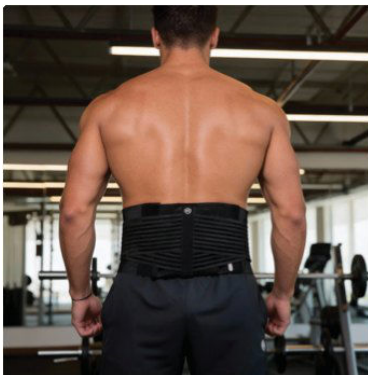

LumboFit-Hard™

Rigide lumbale steunbrace

Indicaties:

De LumboFit-Hard is bedoeld voor mensen die stevige uitwendige lumbale ondersteuning en bewegingsbeperking nodig hebben, waaronder:

- Matige tot ernstige lage rugpijn van musculoskeletale oorsprong.
- Lumbale instabiliteit waarbij rigide ondersteuning aan de achterzijde nodig is.
- Degeneratieve aandoeningen van de lumbale wervelkolom waarbij stevige uitwendige stabilisatie wordt aanbevolen.
- Lumbale ondersteuning na letsel of na een ingreep, op advies van een zorgverlener.
- Aandoeningen waarbij het beperken van overmatige lumbale buiging, strekking of rotatie nodig is.
- Ondersteuning tijdens herstel of revalidatie onder medische begeleiding.

Het meest geschikt voor:

- Volwassenen met matige tot ernstige lumbale instabiliteit of pijn.
- Mensen die rigide lumbale ondersteuning aan de achterzijde nodig hebben.
- Patiënten in de herstel- of revalidatiefase.
- Gebruikers die op advies van een zorgverlener een stevige lumbale brace dragen.



LumboFit-Hard™

Rigide lumbale steunbrace

Maatinformatie:

Beschikbaar in:

- One size - past de meeste gebruikers

Materiaal en samenstelling:

- Premium neopreen
- Gevoerde rigide kunststof plaat
- Elastische banden
- Microsluitingssysteem met klittenband

Was- en onderhoudsinstructies:



Alleen
handwas



Wassen met koud
zeepsop



Alleen in schaduw
aan lucht drogen



Niet
strijken



Niet
bleken



Volledig laten drogen
voor gebruik

LumboFit-Hard™

Rigide lumbale steunbrace

Waarschuwingen / contra-indicaties:

Gebruik de ondersteunende brace niet bij:

- Aandoeningen waarbij onbeperkte beweeglijkheid van de wervelkolom nodig is.
- Pathologie van de wervelkolom zonder begeleiding door een zorgverlener.
- Huidinfecties of wonden onder de brace.
- Overgevoeligheid of allergie voor neopreen.

Aanvullende voorzorgsmaatregelen:

- Niet bedoeld voor langdurig gebruik zonder begeleiding.
- Trek de brace niet te strak aan.
- Stop het gebruik wanneer pijn, gevoelloosheid of ongemak toeneemt.
- Volg het advies van een zorgverlener over de duur van het gebruik.

Raadpleeg voor gebruik altijd uw arts of fysiotherapeut en volg hun specifieke advies.

VitaBrace

Productinformatie & ondersteuning

www.vitabrace.nl



LumboFit-Hard™

Rigide lumbale steunbrace

Verkocht en ondersteund door

VitaBrace

www.vitabrace.nl



LumboFit-Hard™

Productinformatie & ondersteuning

VitaBrace


www.vitabrace.nl

VitaBrace is verkooppunt en aanspreekpunt voor productinformatie en ondersteuning.



LumboFit-Hard™

Rigide lumbale steunbrace

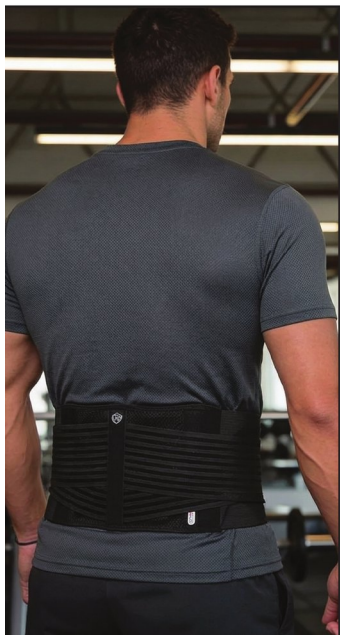

Opslag:

Houd uw brace in een hygiënische staat. Was hem indien nodig. Bewaar de brace wanneer u hem niet gebruikt in het meegeleverde ziplockzakje op een schone, droge en hygiënische plek.


LumboFit-Hard™

Rigide lumbale steunbrace



Draaginstructies:



Inlegplaat plaatsen: Plaats de rigide plaat in de band, met de gevoerde zijde naar het lichaam en de pijl richting de brace.

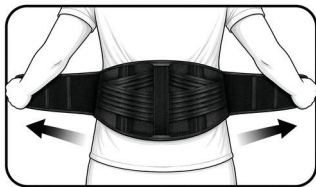

Band plaatsen: Plaats de band achter de onderrug, laag genoeg om uit te lijnen met het staartbeen.

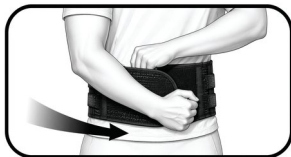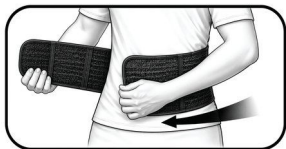


Omwickelen en vastzetten: Sluit het klittenband aan de voorzijde stevig rond de buik.


LumboFit-Hard™

Rigide lumbale steunbrace

Draaginstructies:

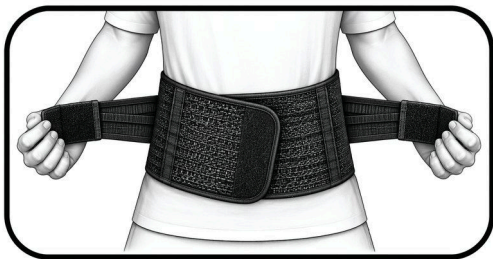

Compressie aanbrengen: Trek de elastische banden van achteren naar voren en zet ze naar wens vast.

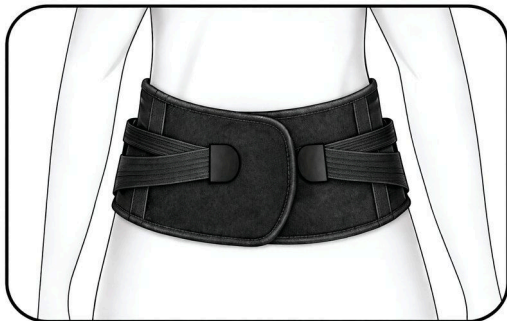

Bijstellen: Zorg voor stabiele maar comfortabele ondersteuning.

Tip: Voor een optimaal effect moet de brace goed aansluiten op het lumbale gebied en dit ondersteunen.

LumboFit-Hard™

Rigide lumbale steunbrace

VitaBrace

Volledige productinformatie

www.vitabrace.nl

Disclaimer:

Deze informatie is uitsluitend bedoeld als algemene product- en gebruiksinformatie. De LumboFit-Hard is een medisch hulpmiddel van klasse I. Het product is bedoeld ter ondersteuning bij het omgaan met klachten en vervangt geen professionele medische diagnose of behandeling. Raadpleeg bij vragen over een medische aandoening altijd uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener.

www.vitabrace.nl