



Gerichte
stabiliteit

ManuFit-Fix™
Duim- en polsstabilisator

ManuFit-Fix™

Duim- en polsstabilisator



Productomschrijving:

Product-SKU:

01060301031

Productcategorie:

Verstelbare, rigide compressiebrace van neopreen en air-mesh met ondersteuning.

Lichaamsdeel:

Duim en pols

Productoverzicht:

De **ManuFit-Fix** biedt nauwkeurig ontworpen stabiliteit voor duim en pols, zonder onnodig in te leveren op comfort of bewegingsvrijheid.

Doel: Biedt stabilisatie en kan klachten van duim en pols helpen verlichten, zoals bij verstuikingen, tenosynovitis en overbelasting.

Ontwerp: Voorzien van twee rigide kunststof verstevigingen voor uitlijning en verstelbare klittenbanden voor persoonlijke compressie.


Comfort: Hoogwaardig neopreen en ademend air-mesh helpen comfortabel langdurig dragen mogelijk te maken.

Algemeen: Stevige ondersteuning die bescherming combineert met de mobiliteit die nodig is voor dagelijkse activiteiten.

ManuFit-Fix™

Duim- en polsstabilisator

Onderdelen van de brace:

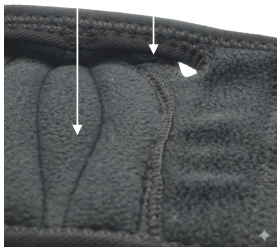

A. Zachte binnenvoering:

Zorgt voor comfortabel draagcomfort.

B. Anatomische duimopening:

Helpt de duim veilig en correct te positioneren.

C. Ademend air-mesh paneel:

Bevordert de luchtcirculatie en helpt warmte- en vochtophoping te beperken.

D. Verstelbare compressieband voor de hand:

Maakt persoonlijke ondersteuning en gecontroleerde immobilisatie van de hand mogelijk.

E. Verstelbare compressieband voor de pols:

Maakt persoonlijke ondersteuning en gecontroleerde immobilisatie van de pols mogelijk.

F. Rigide duimversteviging:

Biedt gestructureerde stabilisatie om de duim in de juiste positie te houden.

G. Verstelbare compressieband voor de duim:

Maakt persoonlijke ondersteuning en gecontroleerde immobilisatie van de duim mogelijk.

ManuFit-Fix™

Duim- en polsstabilisator

Eigenschappen en voordelen:

- Ergonomisch ontwerp
- Zacht neopreen met air-mesh voor ademend en comfortabel dragen
- Zachte stof die helpt vocht af te voeren
- Matige compressie en warmtebehoud
- Lichtgewicht
- Anatomische pasvorm met verstelbare klittenbanden
- Geschikt om ongewenste bewegingen te beperken met behoud van functioneel handgebruik
- Uniseks en gevormd voor links en rechts
- Eenvoudig zelfstandig aan en uit te trekken
- Tot maximaal 8 uur aaneengesloten te dragen



Indicaties:

De **ManuFit-Fix** is bedoeld ter ondersteuning bij de volgende situaties:

1. Orthopedische / musculoskeletale ondersteuning:

- Tenosynovitis van De Quervain
- Verstuikingen en verrekkingen van de duim, waaronder letsel van het MCP- en CMC-gewricht
- Klachten die passen bij het carpaletunnelsyndroom, op advies van uw arts
- Bandletsel van de pols of lichte instabiliteit
- Ondersteuning van pols en duim na trauma of operatie

2. Revalidatie / pijnverlichting:

- Tendinitis en ontsteking rond de basis van de duim
- Overbelastingsklachten bij handmatig werk of sport
- Immobilisatie en geleidelijke functionele training na het verwijderen van gips
- Afbouwende ondersteuning bij terugkeer naar activiteiten, onder begeleiding van een zorgverlener

3. Preventief / functioneel gebruik:

- Ondersteuning bij herhaalde pols-handbewegingen, zoals typen, tillen en racketsporten
- Beschermende brace bij licht werk of dagelijkse taken waarbij stabiliteit met gecontroleerde beweging nodig is

ManuFit-Fix™

Duim- en polsstabilisator

Maatinformatie:

Beschikbaar in:

- One size - geschikt voor de meeste gebruikers

Materiaal en samenstelling:

- Neopreenschuim met zachte nylonstof en air-mesh
- Rigide kunststof versteviging

Was- en onderhoudsinstructies:



Alleen
handwas



Wassen met koud
ezeepsop



Alleen in schaduw
aan lucht drogen



Niet
strijken



Niet
bleken



Volledig laten drogen
voor gebruik

ManuFit-Fix™

Duim- en polsstabilisator

Waarschuwingen / contra-indicaties:

Gebruik de ondersteunende brace niet bij:

- Ernstige bandrupturen waarvoor operatieve behandeling nodig is.
- Breuken waarvoor rigide immobilisatie nodig is.
- Ernstige perifere arteriële vaatziekte.
- Huidinfecties of open wonden op de plaats van toepassing.
- Bekende allergie voor een van de gebruikte materialen.

Aanvullende voorzorgsmaatregelen:

- Niet langer dan 8 uur aaneengesloten dragen.
- Niet dragen tijdens het slapen.
- Stop het gebruik bij een allergische reactie, zoals blaren, branderig gevoel of jeuk, en raadpleeg een arts.

Raadpleeg voor gebruik een arts of fysiotherapeut wanneer u twijfelt of deze brace geschikt is voor uw situatie.

VitaBrace

Productinformatie & ondersteuning

www.vitabrace.nl



ManuFit-Fix

Duim- en polsstabilisator

Verkocht en ondersteund door

VitaBrace

www.vitabrace.nl



ManuFit-Fix

Productinformatie & ondersteuning

VitaBrace

[**www.vitabrace.nl**](http://www.vitabrace.nl)

VitaBrace is verkooppunt en aanspreekpunt voor productinformatie en ondersteuning.



ManuFit-Fix™

Duim- en polsstabilisator




Opslag:

Houd uw brace in een hygiënische staat. Was indien nodig. Bewaar de brace wanneer u hem niet gebruikt in het meegeleverde ziplockzakje op een schone, droge en hygiënische plek.


ManuFit-Fix™

Duim- en polsstabilisator

Gebruiksaanwijzing:

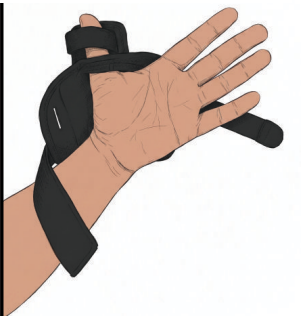

Stap 1: Open de brace volledig. U ziet drie banden: een grote band aan de onderzijde, een middelste band en een kleine band bij de duim. Steek de duim door de duimopening.

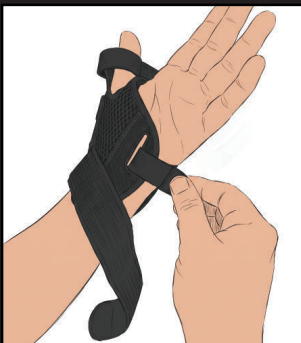

Stap 2: Wikkel de brace over de hand en zet de kleine band rond de duim vast.

ManuFit-Fix™

Duim- en polsstabilisator



Stap 3: Zet de onderste, grootste band rond de pols vast.



Stap 4: Wikkel de middelste band rond de hand. Beweeg de hand licht om de pasvorm comfortabel af te stellen.

Tip: Voor optimaal effect moet de brace de duim en hand stevig ondersteunen zonder de bloedsomloop af te knellen.

ManuFit-Fix™

Duim- en polsstabilisator

VitaBrace

Volledige productinformatie

www.vitabrace.nl

Disclaimer:

Deze informatie is uitsluitend bedoeld als algemene product- en gebruiksinformatie. De ManuFit-Fix is een medisch hulpmiddel van klasse I. Het product is bedoeld ter ondersteuning bij het omgaan met klachten en vervangt geen professionele medische diagnose of behandeling. Raadpleeg bij vragen over een medische aandoening altijd uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener.

www.vitabrace.nl