



**Geïntegreerd
draagharnas**

MomFit-Light™
Zwangerschapsband

MomFit-Light™

Zwangerschapsband

Productomschrijving:

Product-SKU:

5170102011

Productcategorie:

Bidirectionele steunband van textiel, open wikkelform, met Y-vormig schouderharnas.

Lichaamsdeel:

Buik

Productoverzicht:

Zachte lift en gebalanceerde ondersteuning voor dagelijks comfort tijdens de zwangerschap.



De MomFit-Light is een lichtgewicht zwangerschapsharnas, ontworpen om de groeiende buik zacht op te tillen en de belasting van de onderrug te verminderen. Het geïntegreerde ontwerp combineert een ondersteunende buikband, een stabiliserend rugpaneel en een ergonomisch Y-vormig schouderharnas dat het buikgewicht herverdeelt en de houding verbetert.

Dat helpt vermoeidheid te verminderen en het comfort tijdens dagelijkse bezigheden te vergroten, ondersteund door de ademende, rekbare band. Door de neerwaartse trek op de buik te beperken helpt de MomFit-Light ook de buikwand te ondersteunen tijdens dagelijkse bezigheden.

MomFit-Light™

Zwangerschapsband

Onderdelen van de brace:



1. Onderste buiksteunband:

Wordt onder de buik gedragen, gemaakt van zachte, ademende mesh van 100 procent polyester met tweewegs elasticiteit en versterkte klittenbandsluiting. Geeft zachte maar gelijkmatige opwaartse ondersteuning.

2. Breed rugpaneel:

Een flexibele rugsteunband die aan de onderste buiksteunband is gestikt en het lumbosacrale gebied stabiliseert, om de belasting door de naar voren verschoven zwaartelijns te verminderen.

3. Verstelbaar Y-vormig schouderharnas:

Twee schouderbanden komen samen in een centraal punt en worden aan het rugpaneel bevestigd. De banden lopen over de schouders naar de buikband aan de voorzijde en verdelen zo de belasting en verminderen de kromming van de onderrug.

4. Hoogwaardig klittenbandsluitsysteem:

Maakt kleine aanpassingen mogelijk in pasvorm, comfort en spanning.

MomFit-Light™


Zwangerschapsband

Werkingsmechanisme:

Tijdens de zwangerschap zorgt de toenemende buikmassa voor een verschuiving van het zwaartepunt naar voren. Dat leidt tot:

- Overdreven lumbale lordose.
- Toegenomen kanteling van het bekken naar voren.
- Overbelasting van de buikwand en het huidweefsel.
- Oprekking van de banden van de lage rug en het bekken.

EFFECTS OF PREGNANCY ON THE LINE OF GRAVITY AND SPINAL CURVES

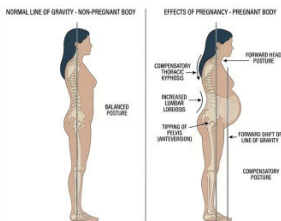

De MomFit-Light werkt deze veranderingen tegen door:

A. Opwaartse buiklift en minder trek op de huid:

Vermindert de neerwaartse trek op de buik en ontlast de opgerekte buikwand. Geeft zachte opwaartse lift aan de groeiende buik, waardoor de trek op de buikwand afneemt. Dat kan het gevoel van zwaarte tijdens staan en lopen verminderen.

B. Herverdeling van de belasting via de schouders:

Het Y-harnas brengt een deel van de zwaartekrachtbelasting van de buik over naar de schoudergordel. Dat vermindert de compressie op de lage rug en verbetert de uitlijning van de wervelkolom.

C. Houdingsstabiliteit:

Het rugpaneel geeft zachte proprioceptieve terugkoppeling die een neutrale houding stimuleert en ondersteunt de structuren van bekken en lage rug tijdens staan, lopen of langdurige activiteit.

D. Dagelijks functioneel comfort:


Verbetert de beweeglijkheid en vermindert vermoeidheid tijdens huishoudelijke taken, werk of zorgtaken.

MomFit-Light™

Zwangerschapsband

Effect op de houding:


De onderstaande vergelijking laat zien welk effect de zwangerschapssteunband op de houding heeft.

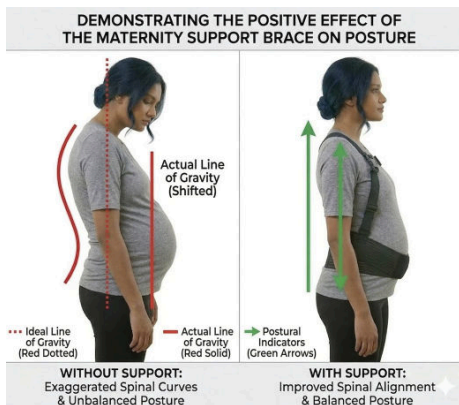

Links, zonder ondersteuning: overdreven krommingen van de wervelkolom en een uit balans geraakte houding, met de werkelijke zwaartelijns naar voren verschoven. Rechts, met ondersteuning: een betere uitlijning van de wervelkolom en een meer gebalanceerde houding.

Til de buik, ontlast de rug:

- Tilt de buik zacht op en vermindert de opwaartse belasting.
- Ontlast de lage rug en de lumbale spieren.
- Stabiliseert de romp voor een natuurlijke houding.

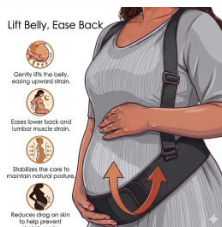

MomFit-Light™

Zwangerschapsband

Eigenschappen en voordelen:

- Geïntegreerd ontwerp uit één stuk, zonder montage.
- Ademende tweewegs gebreide polyester mesh voor comfort in een warm klimaat.
- Zwart, slank profiel en verzorgd, geschikt om onder kleding te dragen.
- Het schouderharnas herverdeelt de belasting en ontlast de lage rug.
- Helpt de neerwaartse trek op de buik te verminderen en ondersteunt de buikwand tijdens dagelijkse bezigheden.
- Ondersteunt de houding tijdens dagelijkse bezigheden.
- Twee maten (S/M en L/XL) voor een nauwkeurige pasvorm.
- Lichtgewicht en geschikt om lang te dragen.
- Klittenbandsysteem voor ondersteuning op maat.
- Ideaal voor comfort in de vroege tot halverwege de zwangerschap.
- Eenvoudig in te pakken en mee te nemen.

MomFit-Light™

Zwangerschapsband

Indicaties:

De MomFit-Light is bedoeld voor:

1. Lichte tot matige lage rugpijn die samenhangt met de zwangerschap.
2. Kanteling van het bekken naar voren en een uit balans geraakte houding.
3. Zwaar gevoel in de buik en spiervermoeidheid.
4. Vroege klachten van het sacro-iliacale gewricht of de bekkengordel.
5. Behoeftte aan zachte ondersteuning van de buikwand tijdens dagelijkse bezigheden.
6. Zachte ondersteuning bij dagelijkse activiteit tijdens de zwangerschap.
7. Lichte ondersteuning van de buikwand na de bevalling, in overleg met een zorgverlener.



Opslag:

Houd uw brace in een hygiënische staat. Was hem indien nodig. Bewaar de brace wanneer u hem niet gebruikt in het meegeleverde ziplockzakje op een schone, droge en hygiënische plek.



MomFit-Light™

Zwangerschapsband

Maatinformatie:

Beschikbaar in:

- Small/Medium (S/M)
- Large/Extra Large (L/XL)

Maat	Onderbuikomtrek	
	Inches	Centimeters
S/M	37-48	94-122
L/XL	48-55	122-140



Materiaal en samenstelling:

- Bidirectioneel steuntexiel
- 100 procent polyester met rubberversterking
- Microsluitingssysteem met klittenband
- Kunststof lussen

Was- en onderhoudsinstructies:



Alleen
handwas



Wassen met koud
zeepsop



Alleen in schaduw
aan lucht drogen



Niet
strijken



Niet
bleken




Volledig laten drogen
voor gebruik

MomFit-Light™

Zwangerschapsband

Waarschuwingen / contra-indicaties:

- Niet gebruiken over open wonden, actieve dermatitis of niet-genezen operatiewonden.
- Patiënten met een verstoorde bloedsomloop, tenzij medisch goedgekeurd.
- Ernstige buikpijn met onbekende oorzaak; dit vraagt om beoordeling.
- Niet aanbevolen om in te slapen met de volledige configuratie, met name met het harnas.
- Gebruik onder begeleiding van een zorgverlener bij een voorgeschiedenis van een risicozwangerschap.
- Stop het gebruik bij buikpijn, gevoelloosheid of moeite met ademen.
- Zorg voor de juiste bandspanning om overmatige compressie te voorkomen.

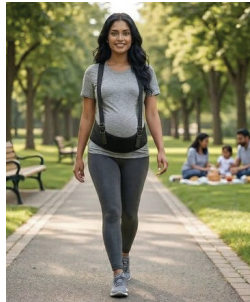

Raadpleeg voor gebruik altijd uw gynaecoloog en volg zijn of haar advies.

Aanvullende voorzorgsmaatregelen:

- Draag de brace niet langer dan 8 uur aaneengesloten.
- Niet dragen tijdens het slapen.
- Stop het gebruik direct bij een allergische reactie, zoals blaren, branderig gevoel, jeuk of roodheid, en raadpleeg een arts.



MomFit-Light™

Productinformatie & ondersteuning

VitaBrace

www.vitabrace.nl

VitaBrace is verkooppunt en aanspreekpunt voor productinformatie
en ondersteuning.



MomFit-Light™

Zwangerschapsband



Dagelijks gebruik:

De MomFit-Light is licht en slank genoeg om de hele dag te dragen tijdens gewone bezigheden. Draag de band over een dun kledingstuk voor het meeste comfort en stel de spanning bij zodra dat prettiger voelt.

MomFit-Light™

Zwangerschapsband

Draaginstructies:



Stap 1: Open de brace en trek hem aan als een rugzak.



Stap 2: Zorg dat de poot van het Y-vormige harnas midden op de rug ligt.

MomFit-Light™

Zwangerschapsband

Draaginstructies:



Stap 3: Zet de buikband net onder de buikwelling vast, zodat uw buik wordt opgetild.



Stap 4: Stel de spanning van het schouderharnas af door de banden aan te trekken of te laten vieren.

MomFit-Light™

Zwangerschapsband

VitaBrace

Volledige productinformatie

www.vitabrace.nl

Disclaimer:

Deze informatie is uitsluitend bedoeld als algemene product- en gebruiksinformatie. De MomFit-Light is een medisch hulpmiddel van klasse I. Het product is bedoeld ter ondersteuning bij het omgaan met klachten en vervangt geen professionele medische diagnose of behandeling.

Raadpleeg bij vragen over een medische aandoening altijd uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener.

www.vitabrace.nl