



**Gerichte
verlichting van
de knieschijf**

PatelloFit-Strap™
Hybride patellastabilisator

PatelloFit-Strap™

Hybride patellastabilisator



Productomschrijving:

Product-SKU:

01100101081

Productcategorie:

Open wikkelbrace van neopreen met dubbele band en kunststof staafjes.

Lichaamsdeel:

Knie

Productoverzicht:

De PatelloFit-Strap is een hybride patellastabilisator die speciaal is ontwikkeld voor gerichte ondersteuning van de knieschijf en de omliggende pezen.

Doel: Oefent zachte, gelijkmatige druk uit rond de knieschijf en kan pijn tijdens bewegen helpen verminderen.

Ontwerp: De hybride werking komt voort uit twee constructieve onderdelen: de verstelbare banden en de kunststof staafjes die daarin zijn verwerkt.

Comfort: Aan beide zijden zitten schuimkussens die het comfort verhogen en schuren tijdens activiteit voorkomen.

Algemeen: Comfortabel voor de hele dag. De brace helpt sporters en actieve mensen met vertrouwen te bewegen en beschermt de knie tegen overbelasting.

PatelloFit-Strap™

Hybride patellastabilisator

Onderdelen van de brace:



A. Zachte mesh:

Zorgt voor comfort en ademend vermogen ter hoogte van de knieschijf.

B. Schuimvulling:

Voor een comfortabele pasvorm achter de knie.

C. Bovenste verstelbare klittenbanden:

Maken een pasvorm op maat mogelijk.

D. Onderste verstelbare klittenbanden:


Maken een pasvorm op maat mogelijk.

PatelloFit-Strap™

Hybride patellastabilisator

Eigenschappen en voordelen:

- Ergonomisch ontwerp.
- Verstelbare banden voor een pasvorm op maat.
- Kunststof staafjes voor extra ondersteuning van de knieschijf.
- Posteromediale en posterolaterale schuimkussens voor een comfortabele pasvorm en om schuren door de brace tijdens activiteit te voorkomen.
- Ademend materiaal.
- Lichtgewicht.
- Eenvoudig te dragen.
- Uniseks en geschikt voor beide knieën.
- Discreet te dragen onder de meeste kleding.
- Tot maximaal 8 uur aaneengesloten te dragen.

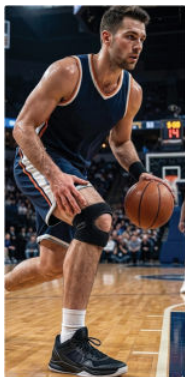

PatelloFit-Strap™

Hybride patellastabilisator

Indicaties:

De brace is goed bruikbaar bij het verlichten van de klachten die horen bij instabiliteit van de knieschijf. De specifieke toepassingen staan hieronder vermeld.

1. Overbelasting en sportgerelateerde aandoeningen:

- Jumper's knee (patellatendinitis).
- Runner's knee (patellofemoraal pijnsyndroom).
- Ziekte van Osgood-Schlatter.

2. Structuur- en uitlijningsproblemen:

- Chondromalacie van de patella, oftewel verweking van het kraakbeen onder de knieschijf.
- Lichte maltracking van de knieschijf.
- Lichte instabiliteit van de knieschijf.

3. Pijnbestrijding en ondersteuning:

- Pijn aan de voorzijde van de knie.
- Algemene overbelasting of ongemak van de knie tijdens activiteit.
- Lichte kniepijn die samenhangt met artrose.

4. Revalidatie:

- Ondersteuning van de knie na letsel.
- Voorkomen van hernieuwd letsel tijdens lichamelijke activiteit.

5. Sport en activiteit:

- Preventieve ondersteuning tijdens hardlopen, training en sport.
- Ondersteuning van het patellaverloop bij sporters.
- Voorkomen van hernieuwd letsel bij terugkeer naar sport.

PatelloFit-Strap™

Hybride patellastabilisator

Maatinformatie:

- One size - past de meeste gebruikers

Materiaal en samenstelling:

- Neopreenschuim met nylonplush
- Verstelbare klittenbanden
- Kunststof staafjes

Was- en onderhoudsinstructies:



Alleen
handwas



Wassen met koud
zeepsop



Alleen in schaduw
aan lucht drogen



Niet
strijken



Niet
bleken



Volledig laten drogen
voor gebruik

PatelloFit-Strap™

Hybride patellastabilisator

Waarschuwingen / contra-indicaties:

Gebruik de ondersteunende brace niet bij:

- Ernstige bandrupturen waarvoor operatief herstel nodig is.
- Breuken waarvoor rigide immobilisatie nodig is.
- Huidinfecties of open wonden op de plaats van toepassing.
- Bekende allergie voor een van de gebruikte materialen.

Aanvullende voorzorgsmaatregelen:

- Draag de brace niet langer dan 8 uur aaneengesloten.
- Niet dragen tijdens het slapen.
- Stop het gebruik bij een allergische reactie, zoals blaren, branderig gevoel of jeuk, en raadpleeg een arts.

Raadpleeg voor gebruik altijd uw arts of fysiotherapeut en volg hun specifieke advies.

VitaBrace

Productinformatie & ondersteuning

www.vitabrace.nl



PatelloFit-Strap™

Hybride patellastabilisator

Verkocht en ondersteund door

VitaBrace

www.vitabrace.nl



PatelloFit-Strap™

Productinformatie & ondersteuning

VitaBrace

www.vitabrace.nl

VitaBrace is verkooppunt en aanspreekpunt voor productinformatie en ondersteuning.



PatelloFit-Strap™

Hybride patellastabilisator



Opslag:

Houd uw brace in een hygiënische staat. Was hem indien nodig. Bewaar de brace wanneer u hem niet gebruikt in het meegeleverde ziplockzakje op een schone, droge en hygiënische plek.


PatelloFit-Strap™

Hybride patellastabilisator

Draaginstructies:



Stap 1: Ga comfortabel zitten en houd de brace achter uw knie.

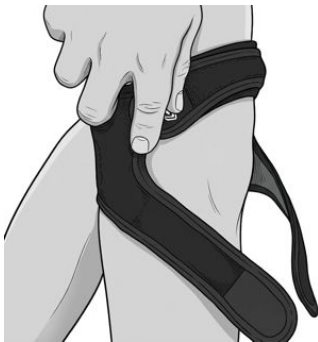

Stap 2: Breng de linkerband van boven om het bovenste deel van de knie en sluit hem af met de rechterband van boven.

PatelloFit-Strap™

Hybride patellastabilisator

Draaginstructies:



Stap 3: Breng de linkerband van onderen om het onderste deel van de knie en sluit hem af met de rechterband van onderen.



Stap 4: Beweeg uw knie licht om de pasvorm bij te stellen tot hij comfortabel zit.

Tip: Lijn de mesh ongeveer uit met het kniegewricht voor een optimale werking.

PatelloFit-Strap™

Hybride patellastabilisator

VitaBrace

Volledige productinformatie

www.vitabrace.nl

Disclaimer:

Deze informatie is uitsluitend bedoeld als algemene product- en gebruiksinformatie. De PatelloFit-Strap is een medisch hulpmiddel van klasse I. Het product is bedoeld ter ondersteuning bij het omgaan met klachten en vervangt geen professionele medische diagnose of behandeling. Raadpleeg bij vragen over een medische aandoening altijd uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener.

www.vitabrace.nl