



**Naadloze
compressie
van 8 inch**

PostFit™
Buikband

Productomschrijving:

Product-SKU:

05170108011

Productcategorie:

Naadloze wikkelband van rekbaar polyester en nylon.

Lichaamsdeel:

Buik

Productoverzicht:

De PostFit is een ondersteunende buikband, ontworpen om de buikwand te stabiliseren, het herstel na een bevalling of operatie te ondersteunen en gedoseerde compressie te geven voor meer comfort.



Het is een naadloze buiksteunband uit één stuk van 8 inch breed, ontwikkeld om gelijkmatige compressie te geven over het hele buikgebied.

Anders dan gangbare buikbanden die zijn opgebouwd uit aaneengestikte panelen van 3 tot 4 inch, voorkomt het doorlopende compressievlak van de PostFit drukverschillen. Dat verhoogt het comfort en geeft gelijkmatige ondersteuning van de buikwand.

De band wordt om de buik gewikkeld en aan de voorzijde gesloten. Zo geeft hij gelijkmatige ondersteuning rondom en comfort tijdens dagelijkse beweging.

Onderdelen van de band:



A. Buikcompressiepaneel:

Een doorlopend paneel voor ononderbroken compressie zonder drukverschillen.

B. Precisie microsluiting met klittenband:

Sluitsysteem aan de voorzijde voor compressie op maat.



Van boven naar beneden: dunne afwerking die niet in de huid snijdt, fijne stiksels voor een naadloos draaggevoel, zacht materiaal voor extra comfort en klittenband van medische kwaliteit.

Werkingsmechanisme:

A. Ondersteuning van de buikwand

De PostFit geeft zachte tot stevige uitwendige compressie die:

- De belasting van verzwakte buikspieren vermindert.
- De rompstabiliteit tijdens beweging verbetert.
- Opgerekte weefsel na zwangerschap of operatie ondersteunt.

B. Stabilisatie na een operatie

Door overmatige beweging rond het litteken te beperken:

- Vermindert de band pijn tijdens bewegen.
- Bevordert hij een goede uitlijning tijdens de genezing.

C. Herstel na de bevalling

Na de bevalling is het weefsel losser en vermoeid. De band:

- Brengt de buikspieren dichterbij elkaar.
- Vermindert de druk op de onderrug.
- Geeft ondersteuning tijdens borstvoeding, lopen of tillen.

D. Ondersteuning bij een hernia

Door overmatige beweging rond het litteken te beperken:

- Vermindert de band pijn tijdens bewegen.
- Bevordert hij een goede uitlijning tijdens de genezing.

E. Betere doorbloeding en minder oedeem

Lichte compressie kan helpen om:

- Zwelling en een gespannen gevoel te helpen verminderen.
- Het comfort na een operatie te vergroten.


Eigenschappen en voordelen:

- Naadloos ontwerp uit één stuk van 8 inch voor gelijkmatige compressie zonder drukverschillen.
 - Comfortabeler dan gangbare buikbanden die zijn opgebouwd uit aaneengestikte stroken van 3 tot 4 inch.
 - Ondersteunt de genezing na de bevalling en na een operatie.
 - Geeft versterking bij verzwakte buikspieren.
 - Helpt pijn te verminderen tijdens bewegen, hoesten of staan.
-
- Slank profiel, geschikt om onder kleding te dragen.
 - Ademende nylonconstructie, geschikt voor langdurig dragen.
 - Precisiesluiting met microsluiting voor spanning op maat.

VOOR

NA



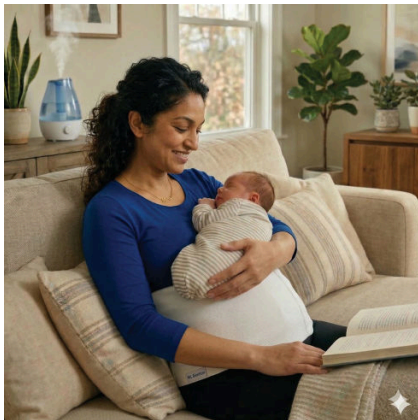

Indicaties:

- Ondersteuning van de buik na een vaginale bevalling of keizersnede.
 - Herstel na buikoperaties, zoals een keizersnede, laparotomie, herniaoperatie, baarmoederverwijdering of bariatrische ingrepen.
 - Ondersteuning bij een navelbreuk of kleine ventrale breuk, niet genezend van aard.
 - Zwakke buikspieren na zwangerschap, ziekte of langdurige inactiviteit.
-
- Klachten in de onderrug door een verminderde buikspanning.
 - Vermindering van oedeem en zwelling na een operatie.
 - Betere beweeglijkheid tijdens het herstel.
 - Algemene buikondersteuning bij lichte tot matige compressiebehoefte.

Maatinformatie:

Beschikbaar in:

- Small/Medium (S/M)
- Large/Extra Large (L/XL)
- 2XL



Maat	Tailleomtrek	
	Inches	Centimeters
S/M	26-34	66-86.5
L/XL	34-42	86.5-106.5
2XL	42-51	106.5-129.5



Materiaal en samenstelling:

- **Nylon met polyesterplush** (zacht, rekbaar materiaal)
- **Klittenband** (voor het microsluitingssysteem)

Was- en onderhoudsinstructies:



**Alleen
handwas**



**Wassen met koud
zeepsop**



**Alleen in schaduw
aan lucht drogen**



**Niet
strijken**



**Niet
bleken**



**Volledig laten drogen
voor gebruik**

Waarschuwingen / contra-indicaties:

- Niet aanbrengen over geïnfecteerde wonden, open wonden of actieve dermatitis.
- Niet geschikt voor patiënten met ernstige hart- of longaandoeningen waarbij de buik zich onbelemmerd moet kunnen uitzetten.
- Vermijd gebruik bij grote, beklemden of pijnlijke breuken; deze vragen om spoedige medische beoordeling.
- Stop het gebruik wanneer de band meer pijn, gevoelloosheid, ademhalingsproblemen of misselijkheid veroorzaakt.
- Gebruik de band na een operatie onder medische begeleiding.
- Zorg dat de spanning comfortabel is en niet te strak.
- Draag de band niet tijdens het slapen wanneer de compressie beklemmend aanvoelt.
- Controleer de huid regelmatig bij langdurig gebruik.
- Breng de band niet aan op een natte of vochtige huid.
- Maak de band tijdens de maaltijd geleidelijk losser om ongemak te voorkomen.

Aanvullende voorzorgsmaatregelen:

- Draag de band niet langer dan 8 uur aaneengesloten.
- Niet dragen tijdens het slapen.
- Stop het gebruik direct bij een allergische reactie, zoals blaren, branderig gevoel, jeuk of roodheid, en raadpleeg een arts.

Raadpleeg voor gebruik altijd uw arts of fysiotherapeut en volg hun specifieke advies.



PostFit™

Productinformatie & ondersteuning

VitaBrace

[**www.vitabrace.nl**](http://www.vitabrace.nl)

VitaBrace is verkooppunt en aanspreekpunt voor productinformatie
en ondersteuning.



PostFit™

Buikband



Opslag:

Houd uw brace in een hygiënische staat. Was hem indien nodig. Bewaar de brace wanneer u hem niet gebruikt in het meegeleverde ziplockzakje op een schone, droge en hygiënische plek.

Draaginstructies:



Stap 1: Houd de geopende band achter uw rug.



Stap 2: Wikkel de band om uw buik.

Draaginstructies:



Stap 3: Zet de band vast met het klittenband en stel de compressie af zoals gewenst.

Let op: Zorg dat de band gelijkmatig aansluit en dat de compressie comfortabel is en niet knelt.

VitaBrace

Volledige productinformatie

www.vitabrace.nl

Disclaimer:

Deze informatie is uitsluitend bedoeld als algemene product- en gebruiksinformatie. De PostFit is een medisch hulpmiddel van klasse I. Het product is bedoeld ter ondersteuning bij het omgaan met klachten en vervangt geen professionele medische diagnose of behandeling. Raadpleeg bij vragen over een medische aandoening altijd uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener.