



**Achtvormige
wikkel-
ondersteuning**

TaloFit-PressPro™
Verstelbare enkelcompressiebrace

TaloFit-PressPro™

Verstelbare enkelcompressiebrace



Productomschrijving:

Product-SKU:

01120107011

Productcategorie:

Verstelbare enkelcompressie-ondersteuning van neopreen.

Lichaamsdeel:

Enkel

Productoverzicht:

De TaloFit-PressPro is een verstelbare ondersteuning van neopreen die warmte, compressie en stabiliteit geeft bij zwakke of geblesseerde enkels.

Doel: Houdt warmte vast en geeft instelbare compressie om zwakke, geblesseerde of overbelaste enkels te ondersteunen.

Ontwerp: Een neopreen wikkel met open hiel en een verlengde achtevormige band voor instelbare ondersteuning in bandagestijl.


Comfort: Maakt gebruik van zacht neopreen dat warmte vasthoudt, met behoud van een natuurlijk bewegingsbereik.

Algemeen: Een veelzijdige, eenvoudig aan te brengen ondersteuning die de voordelen van warmtetherapie combineert met stevige, individueel instelbare compressie.

TaloFit-PressPro™

Verstelbare enkelcompressiebrace

Onderdelen van de brace:

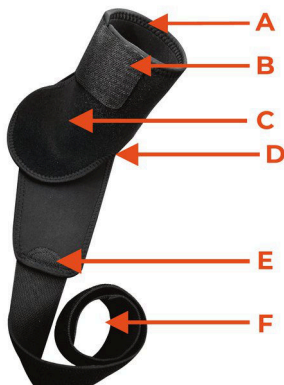

A. Beenopening:

Sluit aan rond het onderbeen.

B. Compressieband voor het been:

Zet de brace met een breed klittenband vast rond het onderbeen.

C. Neopreen enkelwikkel:

Geeft warmte en basiscompressie rond het enkelgewricht.

D. Hielopening:

Houdt de brace tijdens beweging op de juiste plaats.

E. Klein klittenband:

Zet de brace vast rond de voet.

F. Achtvormige compressieband:

Geeft instelbare ondersteuning, vergelijkbaar met enkeltaping.

TaloFit-PressPro™

Verstelbare enkelcompressiebrace

Eigenschappen en voordelen:

- Neopreen dat warmte vasthoudt en het comfort verhoogt.
- De achtvormige compressieband maakt instelbare, gerichte ondersteuning mogelijk.
- Het ontwerp met open hiel houdt de brace op de juiste plaats.
- Instelbare compressie, vergelijkbaar met een elastische bandage.
- Verstelbare klittenbandsluiting voor een stevige pasvorm.
- Ondersteunt de natuurlijke beweging van de enkel zonder rigide beperking.
- Lichtgewicht en slank ontwerp.
- Te dragen onder of over sokken en in ruimzittende, comfortabele schoenen.
- Geschikt voor de linker- en de rechterenkel.



TaloFit-PressPro™

Verstelbare enkelcompressiebrace

Indicaties:

De TaloFit-PressPro is bedoeld om de klachten te helpen verlichten die horen bij lichte tot matige instabiliteit van de enkel, letsel aan weke delen en overbelasting, waaronder:

1. Bandletsel en instabiliteit:

- Lichte tot matige enkelverstuikingen (graad I tot II).
- Restinstabiliteit van de enkel na bandletsel.
- Terugkerende episodes waarbij de enkel door zakt.

2. Weke delen en overbelasting:

- Tendinitis in het enkelgebied.
- Spierverrekking of vermoeidheid rond de enkel.
- Overbelastingsletsel door sport of langdurige activiteit.

3. Ondersteuning na letsel of behandeling:

- Ondersteuning tijdens de revalidatie na een enkelverstuiking.
- Herstelfase na het verwijderen van gips of een brace, op advies van een zorgverlener.
- Beheersing van oedeem na licht enkeltrauma.

4. Functioneel en preventief gebruik:

- Preventieve ondersteuning tijdens sport of lichamelijke activiteit.
- Gebruik op het werk bij lang staan of lopen.
- Zwelling of vermoeidheid van de enkel tijdens reizen.

TaloFit-PressPro™

Verstelbare enkelcompressiebrace

Het meest geschikt voor:

- Lichte tot matige enkelverstuikingen en instabiliteit.
- Zwelling, vermoeidheid of overbelasting van de enkel.
- Ondersteuning tijdens sport, dagelijkse activiteit of reizen.
- Revalidatie en de fase van terugkeer naar bewegen.

Maatinformatie:

Beschikbaar in:

- One size - past de meeste gebruikers

Materiaal en samenstelling:

- Hoogwaardig neopreen met zachte nylonvoering
- Elastische compressieband
- Microsluitingssysteem met klittenband

Was- en onderhoudsinstructies:



Alleen
handwas



Wassen met koud
zeepsop



Alleen in schaduw
aan lucht drogen



Niet
strijken



Niet
bleken



Volledig laten drogen
voor gebruik

TaloFit-PressPro™

Verstelbare enkelcompressiebrace

Waarschuwingen / contra-indicaties:

Gebruik de ondersteunende brace niet bij:

- Ernstige rupturen van de enkelbanden waarvoor operatieve stabilisatie nodig is.
- Breuken waarvoor rigide immobilisatie nodig is.
- Ernstige perifere arteriële vaatziekte.
- Huidinfecties of open wonden op de plaats van toepassing.
- Bekende allergie voor neopreen of een van de andere gebruikte materialen.

Aanvullende voorzorgsmaatregelen:

- Draag de brace niet langer dan 8 uur aaneengesloten.
- Niet dragen tijdens het slapen, tenzij een zorgverlener anders adviseert.
- Stop het gebruik bij pijn, gevoelloosheid, tintelingen of huidirritatie en raadpleeg een arts.

Raadpleeg voor gebruik altijd uw arts of fysiotherapeut en volg hun specifieke advies.

VitaBrace

Productinformatie & ondersteuning

www.vitabrace.nl



TaloFit-PressPro™

Verstelbare enkelcompressiebrace

Verkocht en ondersteund door

VitaBrace

www.vitabrace.nl



TaloFit-PressPro™

Productinformatie & ondersteuning

VitaBrace

www.vitabrace.nl

VitaBrace is verkooppunt en aanspreekpunt voor productinformatie
en ondersteuning.



TaloFit-PressPro™

Verstelbare enkelcompressiebrace



Opslag:

Houd uw brace in een hygiënische staat. Was hem indien nodig. Bewaar de brace wanneer u hem niet gebruikt in het meegeleverde ziplockzakje op een schone, droge en hygiënische plek.

TaloFit-PressPro™

Verstelbare enkelcompressiebrace

Draaginstructies:



Stap 1: Breng de brace om de enkel aan, zorg dat de hiel in de hielopening zit en zet de compressieband voor het been vast.



Stap 2: Wikkel de compressieband in een achtvormig patroon om de enkel.

TaloFit-PressPro™

Verstelbare enkelcompressiebrace

Draaginstructies:



Stap 3: Zet de compressieband vast met het klittenband en stel af tot het comfortabel zit.

Tip: Voor een optimaal effect moet de brace stevig om de enkel sluiten, met genoeg ruimte voor een goede bloedsomloop.

TaloFit-PressPro™

Verstelbare enkelcompressiebrace

VitaBrace

Volledige productinformatie

www.vitabrace.nl

Disclaimer:

Deze informatie is uitsluitend bedoeld als algemene product- en gebruiksinformatie. De TaloFit-PressPro is een medisch hulpmiddel van klasse I. Het product is bedoeld ter ondersteuning bij het omgaan met klachten en vervangt geen professionele medische diagnose of behandeling. Raadpleeg bij vragen over een medische aandoening altijd uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener.

www.vitabrace.nl