



**Vierwegs
gebreide
compressie**

TaloFit-Press™
Enkelcompressiebrace

TaloFit-Press™

Enkelcompressiebrace



Productomschrijving:

Product-SKU:

01120103011

Productcategorie:

Vierwegs gebreide dynamische elastische compressiebrace.

Lichaamsdeel:

Enkel

Productoverzicht:

De TaloFit-Press maakt gebruik van gerichte dynamische breicompresie om zwelling te beheersen en weke delen te ondersteunen zonder de beweging van het gewricht te beperken.

Doel: Geeft gerichte compressie die zwelling en vermoeidheid kan helpen verminderen en die het gewrichtsgevoel ondersteunt.

Ontwerp: Vervaardigd uit een vierwegs dynamisch breimateriaal dat matige, anatomische ondersteuning rond het enkelgewricht geeft.

Comfort: Ontworpen om het gewricht effectief te stabiliseren met behoud van volledige, onbelemmerde natuurlijke beweeglijkheid.

Algemeen: Een veelzijdige compressiebrace die ondersteuning van het gewricht en het beheersen van zwelling combineert met een flexibele, slanke pasvorm.

TaloFit-Press™

Enkelcompressiebrace

Onderdelen van de brace:



A. Beenzijde-opening met zachte zoom:

Sluit comfortabel aan rond het been.

B. Dynamische breicompressiezone:

Geeft gelijkmatige druk om zwelling te beheersen en de stabiliteit van het gewricht te verbeteren.

C. Voetzijde-opening met zachte zoom:

Sluit comfortabel aan rond de voet.

D. Anatomische hielopening:

Zorgt voor de juiste positionering en een goede anatomische pasvorm.

TaloFit-Press™

Enkelcompressiebrace

Eigenschappen en voordelen:

- Ergonomisch ontwerp.
- Vierwegs dynamisch breimateriaal.
- Matige compressie en warmtebehoud.
- Ademend en lichtgewicht.
- Anatomische pasvorm met hielopening.
- Niet-beperkend ontwerp dat natuurlijke beweging toelaat.
- Vochtafvoerend, zodat de huid droog en comfortabel blijft.
- Slank profiel, discreet te dragen in de schoen.
- Uniseks en gevormd voor beide zijden.
- Eenvoudig zelf aan en uit te trekken, zonder hulp.
- Tot maximaal 8 uur aaneengesloten te dragen.



TaloFit-Press™

Enkelcompressiebrace

Indicaties:

De TaloFit-Press wordt gebruikt om de klachten bij de volgende aandoeningen te helpen verlichten.

1. Ondersteuning en stabiliteit:

- Lichte enkelverstuikingen (graad I).
- Algemene zwakte of instabiliteit van de enkel.
- Preventieve ondersteuning tijdens sport en lichamelijke activiteit.

2. Beheersing van zwelling en ontsteking:

- Oedeem na letsel.
- Lichte ontstekingsaandoeningen, zoals tendinitis of synovitis.
- Zwelling na het verwijderen van gips.

3. Revalidatie en herstel:

- Vroege revalidatie na licht enkelletsel.
- Aanvullende ondersteuning bij het omgaan met chronische enkelpijn.
- Hulpmiddel bij proprioceptieve training.

4. Sport en activiteit, extra effectief door de gerichte compressie:

- Preventieve ondersteuning bij intensieve activiteiten, zoals hardlopen, basketbal, voetbal en skiën.
- Voorkomen van hernieuwd letsel bij terugkeer naar sport.

5. Overige toepassingen:

- Preventief gebruik bij terugkerende lichte enkelverstuikingen.
- Comfortabele ondersteuning bij lang staan of lopen.

TaloFit-Press™

Enkelcompressiebrace

Maatinformatie:

Beschikbaar in:

- Small/Medium (S/M)
- Large/Extra Large (L/XL)

Beenontrek net boven het enkelgewricht	S/M	L/XL
Inches	8-9.5	9.5-11
Centimeters	20-24	24-28

Materiaal en samenstelling:

- Vierwegs gebreid met Flex Tech Polyester (FTP)

Was- en onderhoudsinstructies:



Alleen
handwas



Wassen met koud
zeepsop



Alleen in schaduw
aan lucht drogen



Niet
strijken



Niet
bleken



Volledig laten drogen
voor gebruik

TaloFit-Press™

Enkelcompressiebrace

Waarschuwingen / contra-indicaties:

Gebruik de ondersteunende brace niet bij:

- Ernstige bandrupturen waarvoor operatief herstel nodig is.
- Breuken waarvoor rigide immobilisatie nodig is.
- Ernstige perifere arteriële vaatziekte.
- Huidinfecties of open wonden op de plaats van toepassing.
- Bekende allergie voor een van de gebruikte materialen.

Aanvullende voorzorgsmaatregelen:

- Draag de brace niet langer dan 8 uur aaneengesloten.
- Niet dragen tijdens het slapen.
- Stop het gebruik bij een allergische reactie, zoals blaren, branderig gevoel of jeuk, en raadpleeg een arts.

Raadpleeg voor gebruik altijd uw arts of fysiotherapeut en volg hun specifieke advies.

VitaBrace

Productinformatie & ondersteuning

www.vitabrace.nl



TaloFit-PressTM

Enkelcompressiebrace

Verkocht en ondersteund door

VitaBrace

www.vitabrace.nl



TaloFit-Press™

Productinformatie & ondersteuning

VitaBrace

www.vitabrace.nl

VitaBrace is verkooppunt en aanspreekpunt voor productinformatie
en ondersteuning.



TaloFit-Press™

Enkelcompressiebrace




Opslag:

Houd uw brace in een hygiënische staat. Was hem indien nodig. Bewaar de brace wanneer u hem niet gebruikt in het meegeleverde ziplockzakje op een schone, droge en hygiënische plek.

TaloFit-Press™

Enkelcompressiebrace

Draaginstructies:

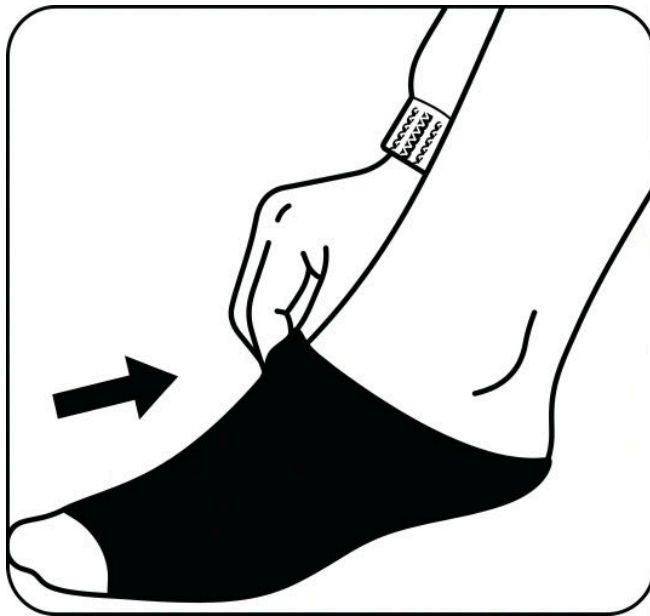


Stap 1: Houd de brace met beide handen vast, met de langere zijde naar boven en de hielopening naar achteren. Steek de voet in de brace en trek hem omhoog.

TaloFit-Press™

Enkelcompressiebrace

Draaginstructies:

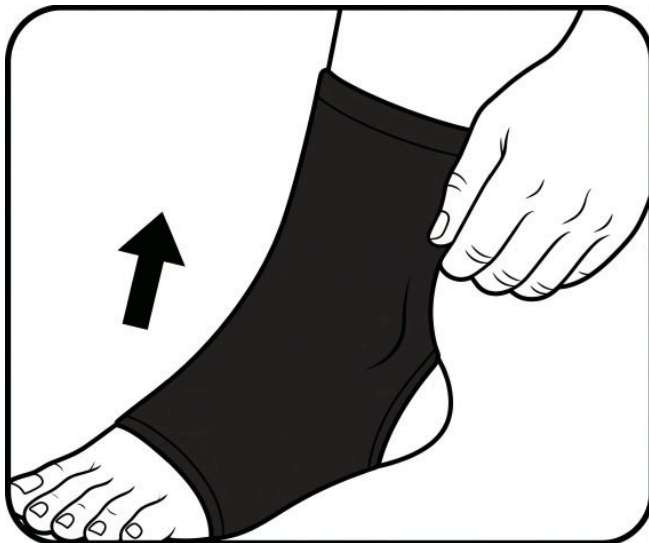

Stap 2: Trek de hielopening over de hiel. Beweeg de voet licht om de pasvorm bij te stellen.

Tip: Voor een optimaal effect moet de brace stevig om de enkel sluiten, met genoeg ruimte voor een goede bloedsomloop.

VitaBrace

Volledige productinformatie

www.vitabrace.nl

Disclaimer:

Deze informatie is uitsluitend bedoeld als algemene product- en gebruiksinformatie. De TaloFit-Press is een medisch hulpmiddel van klasse I. Het product is bedoeld ter ondersteuning bij het omgaan met klachten en vervangt geen professionele medische diagnose of behandeling.

Raadpleeg bij vragen over een medische aandoening altijd uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener.