



**Stabiele
immobilisatie**

VolarFit-Splint™
Polsspalk

VolarFit-Splint™

Polsspalk



Productomschrijving:

Product-SKU:
01050307021

Productcategorie:
Verstelbare rigide polsspalk van nylon pluche en ademend air-mesh.

Lichaamsdeel:
Pols

Productoverzicht:
De **VolarFit-Splint** is een nauwkeurig ontworpen polsimmobilisator die stevige stabilisatie combineert met ademend comfort.

Doel: Zorgt voor nauwkeurige immobilisatie en stabilisatie van de pols voor pijnverlichting en revalidatie na letsel.

Ontwerp: Anatomisch gevormd frame met lichte aluminium steunen en universele duimopeningen voor beide handen.


Comfort: Ademend nylon pluche met verstelbare compressiebanden voor langdurig draagcomfort.

Algemeen: Functionele medische brace met stevige stabilisatie en behoud van bewegingsvrijheid van de vingers.

VolarFit-Splint™

Polsspalk

Onderdelen van de brace:

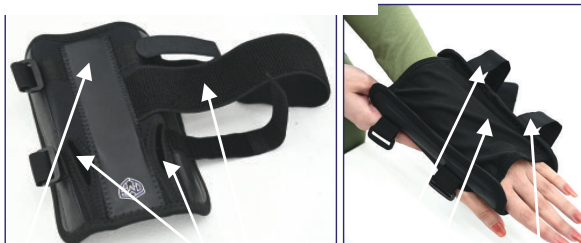

A. Aluminium stabilisatiesplank:

Zorgt voor stevige immobilisatie van de pols en helpt de juiste anatomische uitlijning te behouden.

B. Dubbele duimopeningen:

Universele pasvorm voor zowel de linker- als rechterhand.

C. Verstelbare compressieband voor de hand:

Maakt persoonlijke stabilisatie en gecontroleerde compressie over de hand mogelijk.

D. Verstelbare compressieband voor de pols:

Maakt persoonlijke stabilisatie en gecontroleerde compressie rond de pols mogelijk.

E. Zachte binnenvoering:

Biedt comfort en helpt vochtophoping bij langdurig dragen te beperken.

F. Verstelbare compressieband voor de vingers:

Maakt persoonlijke stabilisatie en gecontroleerde compressie over de vingers mogelijk.

VolarFit-Splint™

Polsspalk

Eigenschappen en voordelen:

- Ergonomisch ontwerp
- Aluminium steunen voor optimale immobilisatie
- Universele pasvorm voor links en rechts (twee duimopeningen)
- Ademend nylon pluche en air-mesh
- Drie verstelbare klittenbanden voor persoonlijke compressie
- Behoudt de uitlijning zonder de vingermobiliteit te beperken
- Eenvoudig met één hand aan en uit te trekken
- Licht en duurzaam voor langdurig draagcomfort



VolarFit-Splint™

Polsspalk

Indicaties:

De brace is specifiek ontworpen voor:

1. Orthopedische / musculoskeletale ondersteuning:

- Polsverstuikingen en -verrekkingen
- Tendinitis en tenosynovitis van De Quervain
- Carpaletunnelsyndroom
- Ondersteuning na een breuk, op advies van uw arts
- Ondersteuning na een operatie of na het verwijderen van gips

2. Revalidatie / pijnverlichting:

- Immobilisatie tijdens fysiotherapie of na het verwijderen van gips
- Beheersing van pijn en zwelling bij acute polsklachten

3. Preventief / functioneel gebruik:

- Bescherming tijdens herhaalde polsbelasting, zoals typen, sporten of tillen



VolarFit-Splint™

Polsspalk

Maatinformatie:

Beschikbaar in:

- Eén maat, geschikt voor de meeste gebruikers

Materiaal en samenstelling:

- Nylon pluche buitenstof
- Air-mesh voering
- Uitneembare aluminium spalk

Was- en onderhoudsinstructies:



Alleen
handwas



Wassen met koud
zeepsop



Alleen in schaduw
aan lucht drogen



Niet
strijken



Niet
bleken



Volledig laten drogen
voor gebruik

VolarFit-Splint™

Polsspalk

Waarschuwingen / contra-indicaties:

Gebruik de ondersteunende brace niet bij:

- Ernstige open wonden, huidinfecties of zweren op of rond de pols.
- Doorbloedingsstoornissen, bijvoorbeeld perifere arteriële aandoeningen, tenzij geadviseerd door een arts.
- Ernstige vervorming van de pols waardoor de brace niet goed kan worden aangebracht.
- Allergie voor een van de gebruikte materialen.
- Gevoelloosheid, tintelingen of toenemende pijn na het dragen van de brace.

Aanvullende voorzorgsmaatregelen:

- Niet langer dan 8 uur aaneengesloten dragen.
- Niet dragen tijdens het slapen.
- Stop het gebruik bij een allergische reactie, zoals blaren, branderig gevoel of jeuk, en raadpleeg een arts.

Raadpleeg voor gebruik een arts of fysiotherapeut wanneer u twijfelt of deze brace geschikt is voor uw situatie.

VitaBrace

Productinformatie & ondersteuning

www.vitabrace.nl



VolarFit-Splint™

Polsspalk

Verkocht en ondersteund door

VitaBrace

www.vitabrace.nl



VolarFit-Splint™

Productinformatie & ondersteuning

VitaBrace

www.vitabrace.nl

VitaBrace is verkooppunt en aanspreekpunt voor productinformatie en ondersteuning.



VolarFit-Splint™

Polsspalk




Opslag:

Houd uw brace in een hygiënische staat. Was indien nodig. Bewaar de brace wanneer u hem niet gebruikt in het meegeleverde ziplockzakje op een schone, droge en hygiënische plek.


VolarFit-Splint™

Polsspalk


Gebruiksaanwijzing:

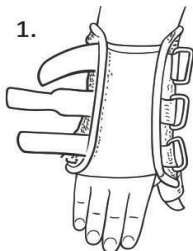

1. Schuif de hand in de brace. Steek de duim door de opening en houd de aluminium steun tegen de handpalm.

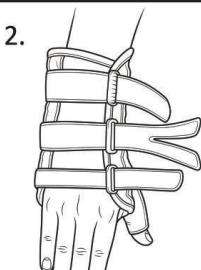


2. Haal de banden door de openingen.

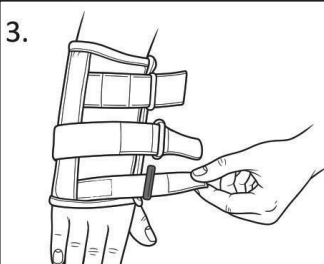


3. Zet de band rond de vingers vast.

VolarFit-Splint™

Polsspalk

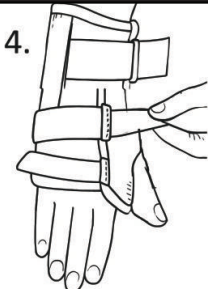

4. Zet de middelste band vast.

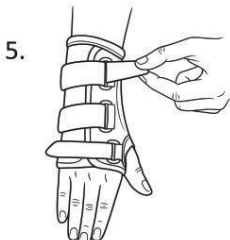

5. Zet de band rond de pols vast.



6. Beweeg de hand licht om de brace comfortabel af te stellen.

Tip: Voor optimaal effect moet de brace de aangedane pols stevig ondersteunen zonder de bloedsomloop af te knellen.

VitaBrace

Volledige productinformatie

www.vitabrace.nl

Disclaimer:

Deze informatie is uitsluitend bedoeld als algemene product- en gebruiksinformatie. De VolarFit-Splint™ is een medisch hulpmiddel van klasse I. Het product is bedoeld ter ondersteuning bij het omgaan met klachten en vervangt geen professionele medische diagnose of behandeling. Raadpleeg bij vragen over een medische aandoening altijd uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener.